


VESPER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

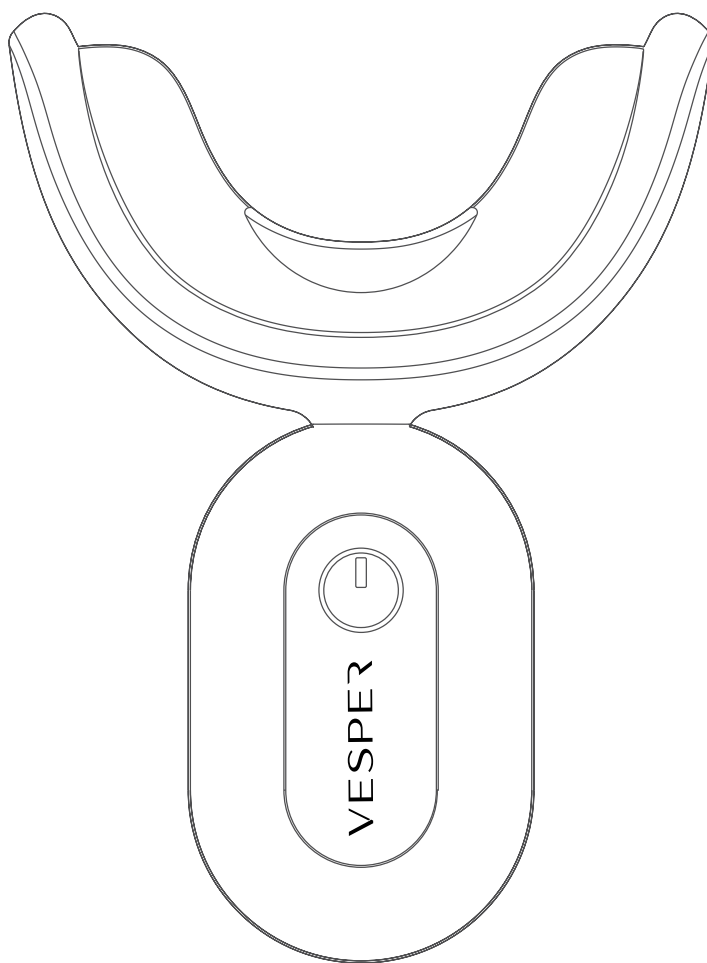

**DISPOSITIVO DE BLANQUEAMIENTO
DE DIENTES CON LUZ AZUL**

Gracias por adquirir este producto. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras referencias.

PRECAUCIONES

1.El dispositivo no puede ser utilizado por o en:

- Dientes artificiales como dientes de porcelana o dentaduras;
- Dientes decolorados por enfermedades o drogas;
- Dientes amarillos/negros/grises debidos a tetraciclina dental severa, fluorosis dental y dientes cariados;
- Esmalte incompleto, exposición de dentina, dientes flojos o dentadura incompleta;
- Gente con alergias o enfermedades periodontales;
- Mujeres embarazadas o en lactancia y gente menor a 16 años.

2.El dispositivo puede ser utilizado por o en:

- Dientes amarillos/negros/grises causados por fumar, por tomar vino rojo/té/café, comer nuez de betel o cualquier otra comida;
- Dientes amarillos/negros/grises relacionados con la edad;
- Dientes amarillos/negros/grises causados por tetraciclina dental leve o moderada, fluorosis dental, etc.;
- Gente que quiere tener sus dientes más blancos y brillosos.

3.Los dientes se pueden manchar fácilmente 24 horas después de usar el dispositivo.

Por favor evite comer comida con colorantes, tomar té/café/refresco/vino rojo/bebidas de moras, usar pasta de dientes o enjuague bucal de color, o fumar.

4.Los dientes de las personas tienen diferentes condiciones. Algunas personas pueden necesitar más intentos para conseguir ese efecto de blancura en sus dientes. Es normal.

5.La bandeja para dientes del dispositivo es aprueba de agua. Puede enjuagarla directamente bajo el grifo. Pero el cuerpo principal del dispositivo no es aprueba de agua. No enjuague directamente bajo el grifo o la sumerja en agua.

6.Para evitar quemaduras o daños en el cuerpo principal del dispositivo no desinfecte la bandeja para dientes sumergiéndola en agua caliente. Se recomienda desinfectarlo con un paño suave con alcohol (con una concentración del 75%).

7.No utilice este producto mientras duerme o cuando se sienta adormilado.

8.El dispositivo esta diseñado exclusivamente para el blanqueo de dientes. No lo use para otro propósito.

9.Por razones de higiene, no comparta este dispositivo con otras personas.

10.Este dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

11.Mantenga el gel blanqueador de dientes alejado de los niños para evitar su ingesta.

Por favor manténgalo en un lugar fresco y seco.

12.No separe, transforme o repare el dispositivo.


INTRODUCCIÓN


Este dispositivo usa la tecnología de blanqueo de dientes por luz azul. Esta luz azul de alta intensidad está especialmente calibrada (con una longitud de onda entre 480-520 nm) para alcanzar el efecto de blanqueamiento de dientes. No solo puede remover manchas en la superficie de los dientes, sino que blanquea los dientes desde el interior. Además, su uso es seguro y efectivo para la mayoría de personas sin causarles irritación a los nervios dentales.

Para lograr un mejor efecto blanqueador de dientes y más rápido, el dispositivo está equipado con un gel blanqueador de dientes desarrollado recientemente. Bajo la luz azul rápidamente toma lugar la reacción oxido-reductiva de los ingredientes activos blanqueadores en el gel blanqueador de dientes, ayudando a remover una gran variedad de manchas en los dientes.

El dispositivo adopta un diseño de monocapa. Con materiales de primera calidad, cuerpo compacto y ligero, y un botón sencillo de operar, es adecuado para uso doméstico. ¡El uso constante de este producto te dará sonrisas más hermosas y brillosas!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

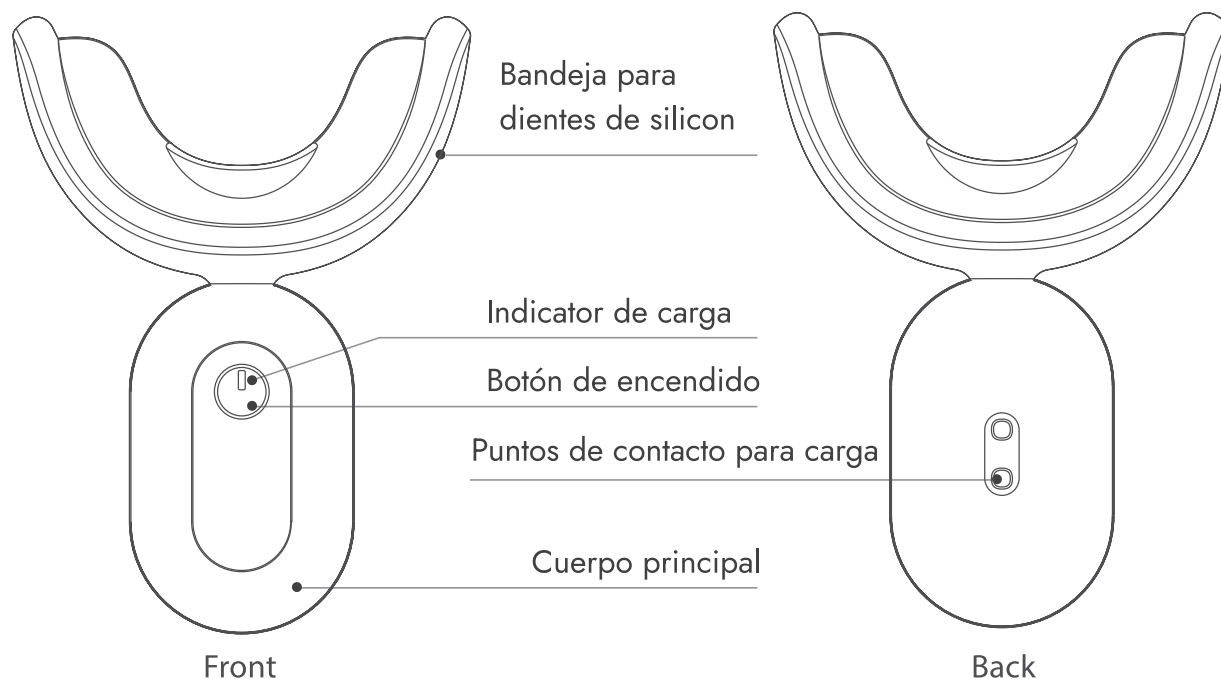

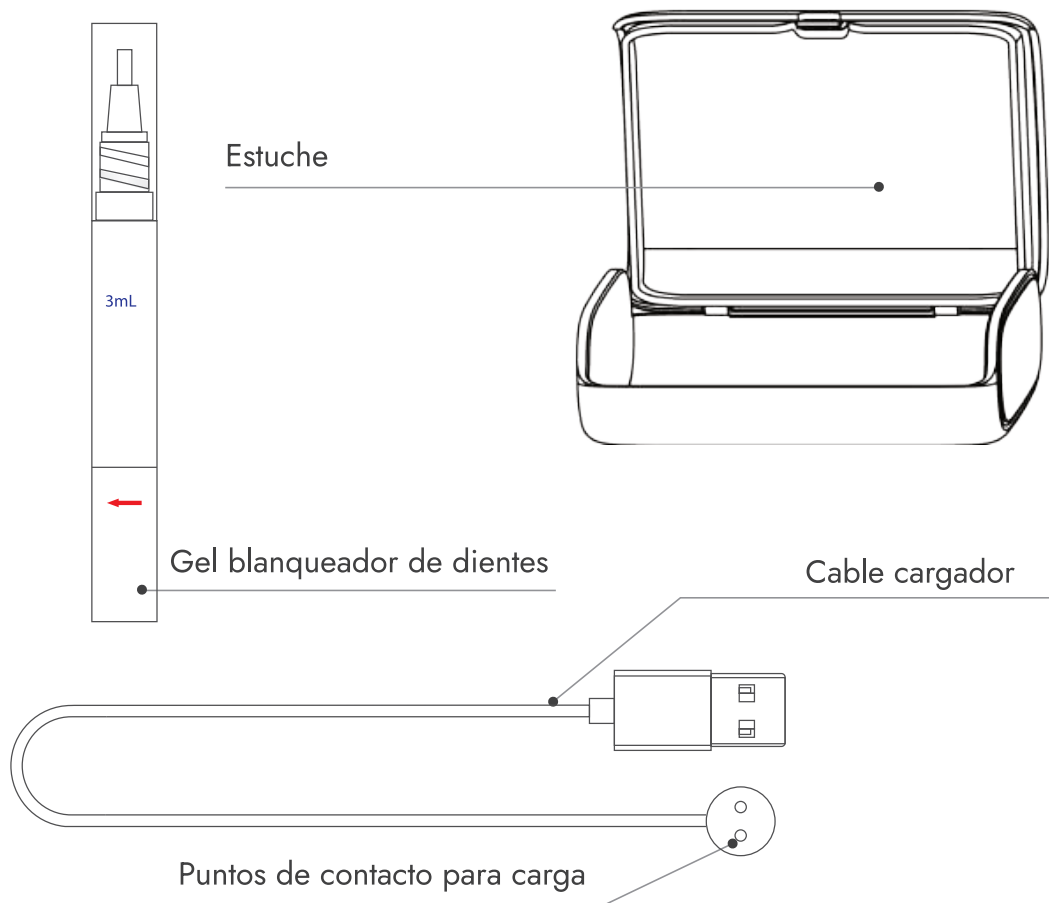

MÉTODOS DE CARGA

1.El indicador de carga parpadeará rápidamente de color blanco cuando la batería esté baja, lo cual te recuerda cargar el dispositivo.

2.Conecte el dispositivo con un adaptador 5V/1A (no incluido) a través del cargador. Conéctelo al enchufe para iniciar la carga.

Nota: Asegúrese de que no hay agua o ningún otro líquido en los puntos de contacto para carga tanto del dispositivo como del cable.

3.El indicador de carga parpadeará lentamente de color blanco durante la carga y se mantendrá encendido una vez que la carga esté completa. Desconecte el adaptador.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

1.Prepare sus dientes

Cepille y enjuague su boca para hacer la limpieza dental. Posteriormente seque sus dientes con un pañuelo.

2.Aplique el gel blanqueador de dientes.

Desenrosque la tapa del gel blanqueador de dientes. Gire la parte inferior del gel en sentido de las manecillas del reloj hasta que sobresalga el gel en la cabeza del cepillo. Aplique el gel en la parte posterior y anterior de sus dientes. Aplique más gel en los dientes más dañados

Nota: Evite contacto con las encías cuando aplique el gel.

Nota: no deseche la tapa del gel para futuras ocasiones.

Consejo: Una vez abierto utilizar el gel blanqueador de dientes en un máximo de 3 meses.

Por favor enjuague y seque las cerdas después de cada uso. Si accidentalmente el gel mancha su ropa o cara lave con agua limpia.

3.Use el dispositivo para blanquear los dientes.

Abra el estuche y saque el dispositivo. Ponga la bandeja para dientes en su boca y muerda suavemente. Mueva ligeramente los dientes para un mejor ajuste.

Nota: La bandeja para dientes es aprueba de agua. Puede enjuagarla directamente bajo el grifo y sacudir el exceso de agua antes de cada uso. Por favor no moje el cuerpo principal del dispositivo ya que no es aprueba de agua.

Nota: Para evitar quemaduras o daño en el dispositivo, no sumerja o enjuague la bandeja para dientes en agua caliente.

4.Comenzando el proceso de blanqueo de dientes

Presione el botón de encendido para prender el dispositivo. Las luces LED azules del dispositivo prenderán junto con un pequeño sonido. Comenzara el proceso de blanqueamiento de dientes.

Nota: Para evitar la incomodidad causada por la luz repentina, se recomienda coloque la bandeja para dientes en su boca antes de prender el producto.

5.Disfrute del proceso de blanqueamiento de dientes.

El proceso de blanqueamiento de dientes está establecido para ser de 20 minutos. El dispositivo se pausará por 0.5 segundos después de trabajar por 10 minutos y se apagará (con un doble sonido de confirmación) después de trabajar por 20 minutos. Puede presionar el botón de encendido para apagar el dispositivo cuando lo necesite.

Nota: Normalmente se necesita un poco de tiempo para adaptarse al uso del dispositivo. Puede usar el dispositivo por 5 o 10 minutos las primeras veces. Una vez acostumbrado al dispositivo, se recomienda usar el dispositivo 20 minutos al día por 7 – 10 días consecutivos.

Nota: La saliva producida durante el proceso de blanqueamiento de dientes es completamente segura de ingerir. Pero si produce demasiada saliva durante este proceso, puede sacar el dispositivo, escupir la saliva, y continuar con el proceso.

Nota: Las personas tienen diferentes condiciones bucales. Si ocurre irritación de encías (como enrojecimiento, hinchazón, dolor) o boca, descontinúe su uso y consulte a un dentista.

Consejo: Se recomienda recostarse de lado o boca abajo para prevenir desbordamiento de saliva durante el proceso de blanqueamiento de dientes. También se recomienda ver videos o programas de televisión para distraerse y disfrutar mas del proceso de blanqueamiento de dientes.

6.Después del proceso de blanqueamiento de dientes

Después de usar, saque la bandeja para dientes y limpie sus dientes cepillándolos o haciendo gárgaras. Enjuague la bandeja y deje secar, posteriormente guárdela de nuevo en el estuche.

EFECTO ESPERADO



Los efectos del blanqueamiento dental pueden variar de acuerdo a las condiciones dentales. Normalmente, los dientes se blanquearán 10 tonos después del uso consecutivo por 5-8 días.

Nota: Si tiene problemas para colocar la almohadilla de algodón puede humedecerla un poco antes de colocar el anillo de fijación.

Nota: El calor irradiado del dispositivo puede verse debilitado si se usa una almohadilla bastante gruesa

ESPECIFICACIONES

Nombre: Dispositivo de blanqueamiento de dientes con luz azul

Materiales: ABS + Silicona líquida de grado alimenticio

Capacidad de la batería: 300 mAh

Voltaje de trabajo: 3.7 V

Carga estándar: 5V/1A

Potencia de salida: 0.6 W (Max)

Tiempo de trabajo continuo: 2 H aproximadamente (puede trabajar por 10 días si se usa 20 minutos al día)

Número de luces LED: 16 pzas.

Longitud de onda de luz azul: 450 nm \pm 10 nm

Ingredientes (Gel blanqueador de dientes): Carbómero, mentol, ETDA, glicerina.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x Dispositivo blanqueador de dientes

1 x Estuche

2 x Gel blanqueador de dientes

1 x Cable de carga

1 x Manual de usuario

CONSEJOS

Tetraciclina dental

Durante el crecimiento de los dientes, las personas, normalmente los niños menores a 8 años y mujeres embarazadas, fácilmente pueden decolorarse los dientes cuando toman tetraciclinas (tales como tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina, etc.) los cuales son llamados manchas de dientes por tetraciclina. Esto es debido a que las tetraciclinas se unen a los iones de calcio de los dientes y la forma estable de la tetraciclina cálcica. La decoloración dental empeorará gradualmente y se mantendrá estable después de los 18 años.

Fluorosis dental

La fluorosis dental normalmente es causada por tomar agua con exceso de fluoruro. La gente con síntomas leves tiene dientes opacos y dientes calcáreos. La gente con síntomas moderados tiene manchas amarillas o café amarillentas en la superficie del diente. La gente con síntomas severos tiene el esmalte incompleto junto con decoloración.

Pigmentación

Los dientes pigmentados son ideales para el tratamiento de blanqueamiento dental con luz azul. Si la gente fuma, toma café/té o comen comida con salsa de soya por un largo plazo mientras tiene un mal habito de limpieza dental, los pigmentos en estas cosas se depositarán gradualmente en la parte mas profundidad de los dientes, esto ocasiona que la superficie de los dientes se vuelva amarilla o negra. Como el lavado normal no puede hacer que la ropa blanca sea mas blanca que antes, el blanqueamiento ordinario de dientes no puede hacer que los dientes sean tan blancos como antes.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿En qué tipo de problemas dentales funciona la luz azul blanqueadora de dientes?

El dispositivo blanqueador de dientes con luz azul trabaja especialmente con los dientes marcados por tabaco, té, fluorosis dental y dientes amarillos.

2. ¿Cuánto tiempo tomara ver el efecto de blanqueado?

Generalmente, si se sigue las instrucciones de uso se pueden ver resultados a partir de los 5 días. En los dientes más oscuros, el efecto de blanqueamiento se ve a partir de los 10 días.

3. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá el efecto de blanqueado?

El tiempo normalmente se ve influenciado por los hábitos alimenticios y las estructuras dentales. El efecto de blanqueamiento durara en promedio 1 – 2 años.

4. ¿El dispositivo de blanqueamiento de dientes con luz azul es seguro? ¿dañara mis dientes?

El dispositivo de blanqueamiento de dientes con luz azul es un método seguro y rápido. La luz azul de baja temperatura no causa irritación en los nervios dentales. Debajo de la luz azul, la oxido reducción rápidamente toma lugar en la superficie de los dientes y los ingredientes activos penetran los túbulos dentinarios para remover una gran variedad de manchas en el diente y dentro del diente. Más rápido y más efectivo. Sin irritación ni efectos secundarios. Seguro para encías y esmalte.

5. ¿Quién no puede utilizar el dispositivo blanqueador de dientes con luz azul?

Los dientes muertos no son aptos para el blanqueamiento por luz debido a que perderán el blanquimiento rápidamente;

El blanqueamiento de dientes por luz azul no funciona en coronas o rellenos de porcelana;

No es apto el blanqueamiento de dientes por luz azul en el caso de tetraciclina dentar severa, fluorosis dental, o decoloración severa de dientes causada por otras razones.

Mujeres embarazadas, niños menores de 16 años y gente con enfermedades periodontales severas no son aptas para un blanqueamiento de dientes con luz azul

6. ¿Cómo conservar el dispositivo blanqueador de dientes de luz azul?

El dispositivo no necesita mantenimiento especial. Solo limpie la bandeja para dientes con alcohol (75%) o con agua tibia después de cada uso y guárdela en su estuche.

Manténgalo en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa.

GARANTÍA VESPER

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Vesper. La garantía de

Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Vesper.
- La unidad haya sido dañada – incluyendo pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.

- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Peru SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)
+56 22 840 5567

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

PERÚ

0800 56185
+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)
+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com