


VESPER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

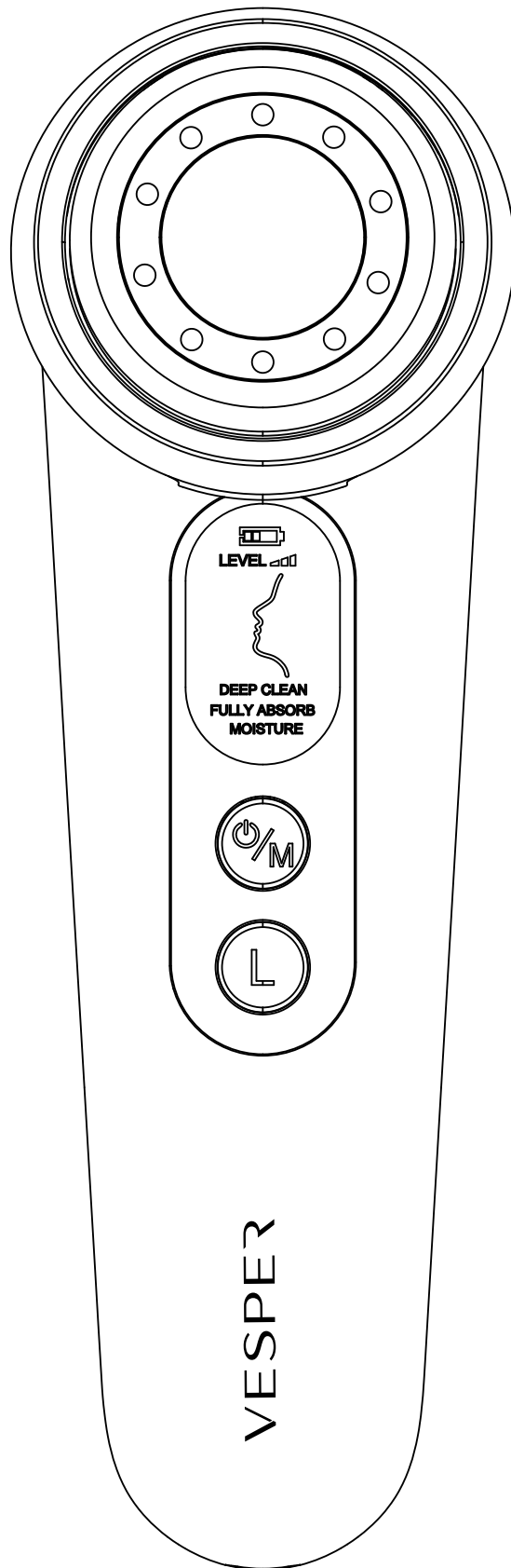

REAFIRMANTE FACIAL CON EMS

FV-005

Gracias por adquirir este producto. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras referencias.

INTRODUCCIÓN

Este Reafirmante Facial con EMS utiliza las más novedosas tecnologías para el cuidado de la piel: Iones, EMS, Vibración Sónica y Fotorrejuvenecimiento. Integra limpieza profunda y absorción de nutrientes con un efecto de firmeza en la piel, haciendo más fácil su limpieza y cuidado facial diario. Tiene 3 modos diferentes de uso y cada modo tiene 5 niveles de intensidad, lo que permite personalizar su limpieza y rutina de cuidado de piel de acuerdo a sus necesidades.

El uso frecuente de este dispositivo le dará un rostro con apariencia más joven, limpio y deslumbrante.

ADVERTENCIA

Por su seguridad, por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras referencias. Entregue el manual de usuario si el dispositivo es transferido a otras personas.


PRECAUCIONES

Por favor revise las siguientes precauciones, de lo contrario podría causar que el dispositivo falle o cause lesiones

1. No use el dispositivo si es particularmente sensible a la luz
2. No use el dispositivo si actualmente está ingiriendo medicamentos que ocasionen sensibilidad en la piel
3. No use el dispositivo en las áreas alrededor de los ojos y orejas o en otras áreas sensibles
4. No use el dispositivo en piel agrietada, eczema o áreas con tumores
5. No use el dispositivo hasta que todas las cosas de metal (tales como aretes, collares o brazaletes) hayan sido retiradas del cuerpo
6. No use el dispositivo mientras se encuentre en plena carga
7. No deje el dispositivo en un solo lugar por más de 10 segundos
8. No permita que ninguna parte del dispositivo se moje con agua o cualquier otro tipo de líquido ya que no es impermeable e invalidaría la garantía
9. No desmonte, altere o repare el dispositivo por su cuenta
10. No use otro tipo de máscaras faciales más que de papel en caso de ser alérgico al metal
11. Cuando el dispositivo esté en uso mantenga la intensidad en un rango aceptable
12. Mantenga el dispositivo alejado de los niños

13.No use el dispositivo si se encuentra en etapa de embarazo a menos que haya sido aprobado por su médico.

DETALLES DEL PRODUCTO

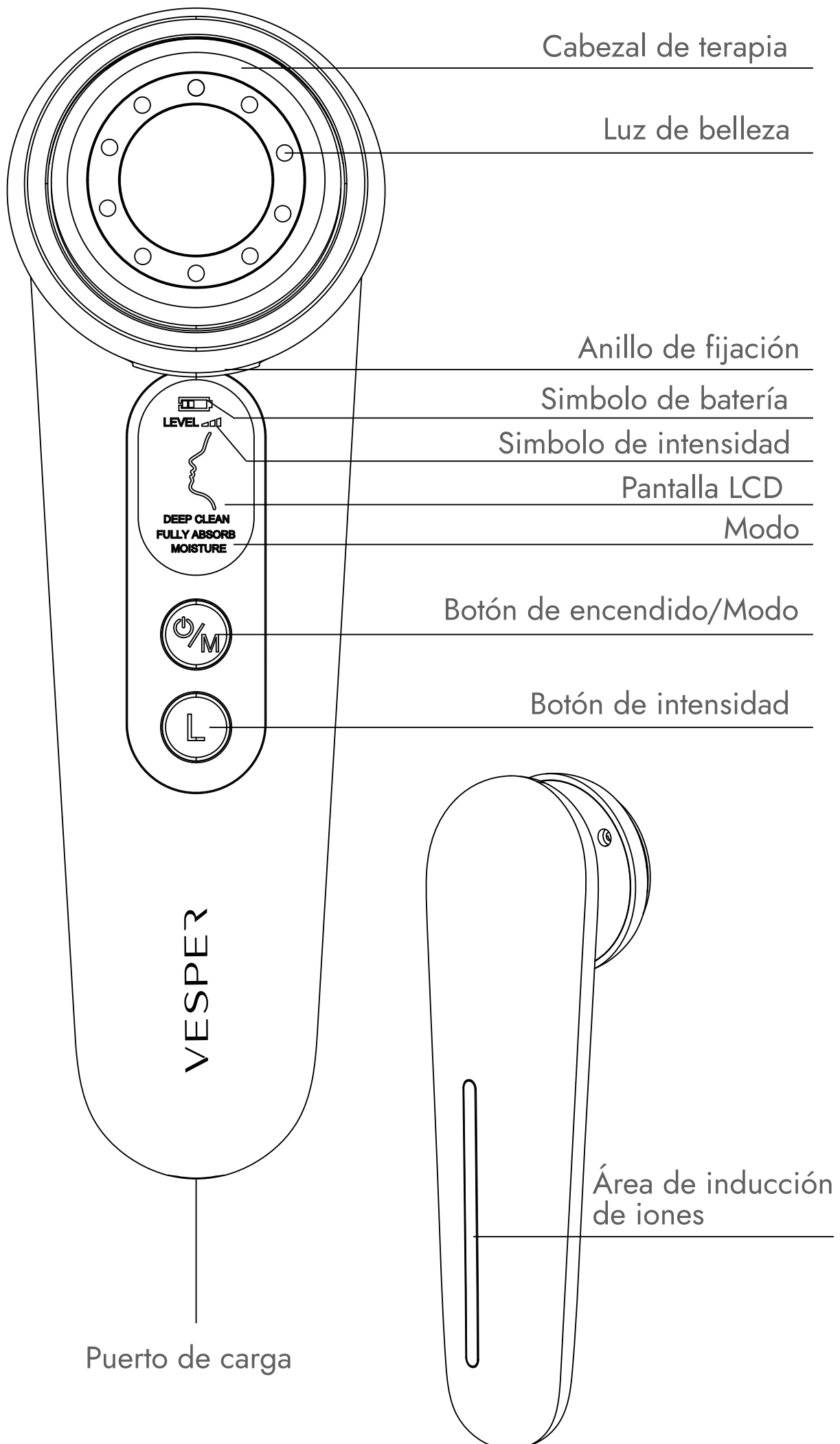

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del dispositivo está basado en el principio de la repulsión de cargas iguales y atracción de cargas diferentes. Cuando se sostiene el dispositivo, formara un circuito entre este y el cuerpo humano. Con ayuda del calor constante y las vibraciones sónicas se alcanza una limpieza efectiva. El dispositivo puede abrir los poros y deshacerse de las toxinas, grasa y suciedad depositada en lo más profundo de los poros. Además, para alcanzar la máxima absorción infundirá agua y nutrientes en la piel de manera profunda. Combinado con la luz de belleza LED, el dispositivo restaura la hidratación y firmeza de la piel, lo que le permitirá tener una apariencia más joven.

CARACTERÍSTICAS

- Alta tecnología: Utiliza tecnologías de cuidado de piel de iones, EMS, vibración sónica y fotorrejuvenecimiento.
- Multifuncional: Integra limpieza profunda, infusión de nutrientes y firmeza de piel.
- Segura: Los sensores de temperatura lo mantienen todo el tiempo en un rango de seguridad.
- Personalizable: 3 modos incluidos y cada uno tiene 5 intensidades para satisfacer diferentes necesidades.
- Intuitiva: La pantalla LCD muestra de manera directa y clara la batería restante, el modo y la intensidad.
- Recargable: Con batería de litio incorporada de 800 mAh dura más entre cargas.
- Conveniente: El anillo de fijación permite un uso sencillo y sanitario del dispositivo.
- Inteligente: Un chip de memoria incorporado memoriza de manera automática tu última opción.
- Interfaz amigable: Emite un sonido con cada operación. Se apaga automáticamente después de 5 minutos de no ser usado.
- Portátil: Pequeño y ligero, fácil de llevar a cualquier lugar.

MÉTODO DE CARGA

1. Cuando la batería esté baja, el símbolo de la batería en la pantalla LCD parpadeará, lo que le recordará que cargue el dispositivo. El dispositivo se apagará automáticamente.
2. Conecte el dispositivo con el cable de carga micro USB mediante un adaptador (no incluido). Conecte el enchufe en el tomacorriente. La pantalla LCD encenderá y el símbolo de batería comenzara a parpadear, lo que significa que la carga ha empezado.


3. El símbolo de batería dejara de parpadear una vez se haya cargado por completo. Desconecte el adaptador.

Nota: El dispositivo no funciona durante la carga.


Nota: El dispositivo puede trabajar 60 minutos seguidos con una sola carga, la cual toma aproximadamente 3 horas.

Nota: Para proteger la batería, si el dispositivo no se usa de manera constante por favor cargue la batería una vez cada 3 meses.

COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE ALGODÓN

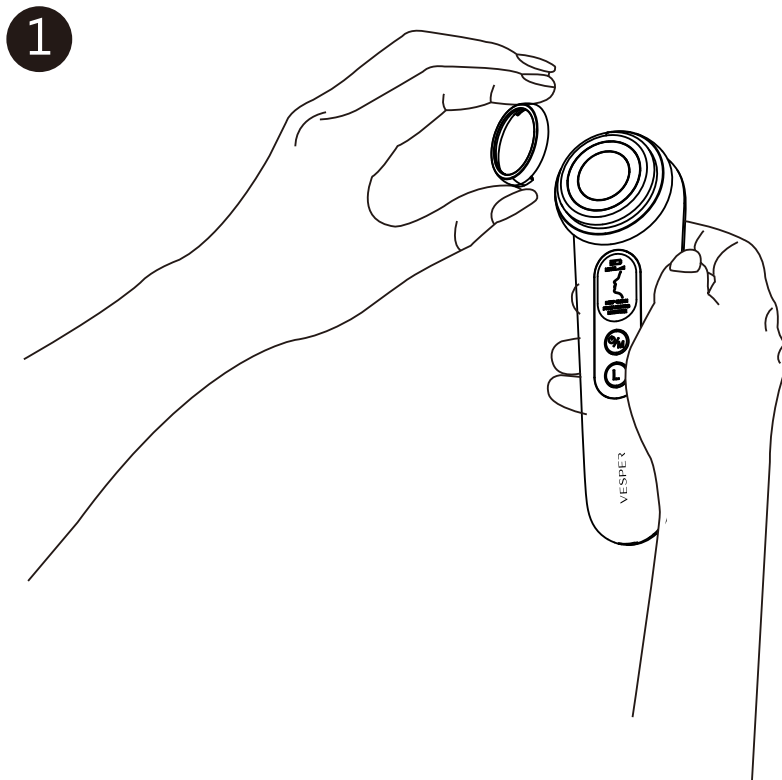

Remueva el anillo de fijación del cabezal de terapia.

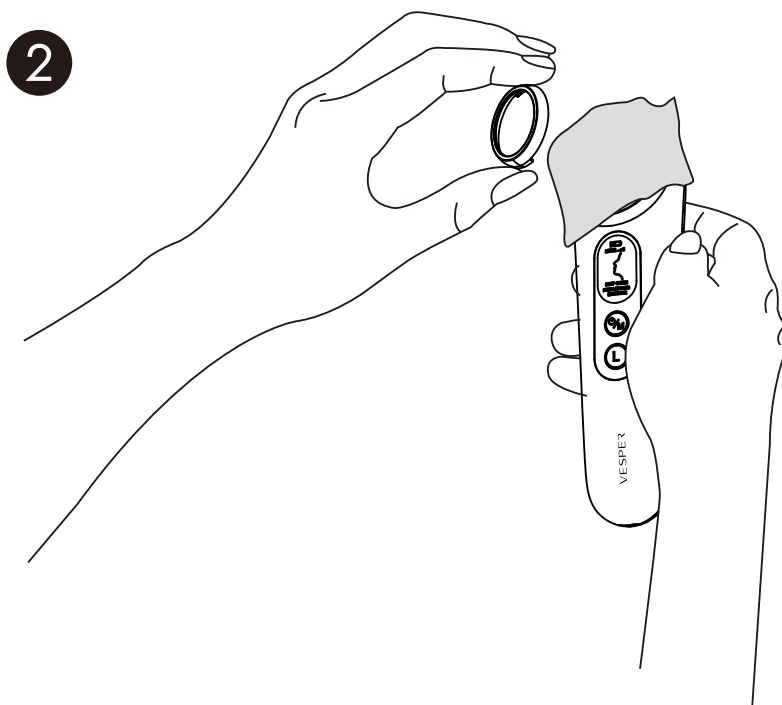


Coloque una almohadilla de algodón en el cabezal de terapia y coloque el anillo de fijación.

Nota: Si tiene problemas para colocar la almohadilla de algodón puede humedecerla un poco antes de colocar el anillo de fijación.

Nota: El calor irradiado del dispositivo puede verse debilitado si se usa una almohadilla bastante gruesa.

3

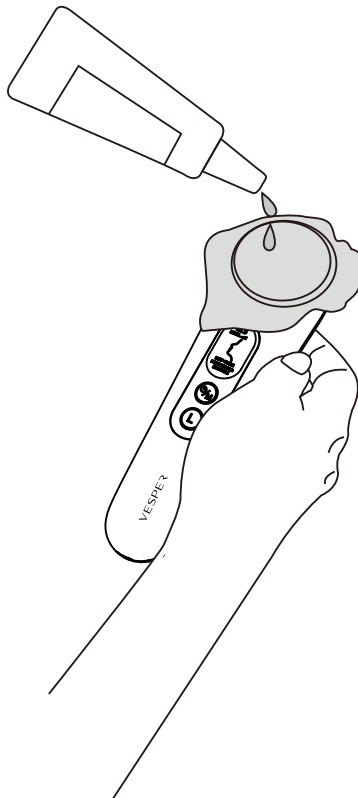


Humedezca la almohadilla de algodón con loción exfoliante o limpiadora.

Nota: El dispositivo no es a prueba de agua. Por favor limpie cualquier gota de loción o producto cosmético antes de cada uso.

FORMA DE USO

MODO 1: LIMPIEZA PROFUNDA


1

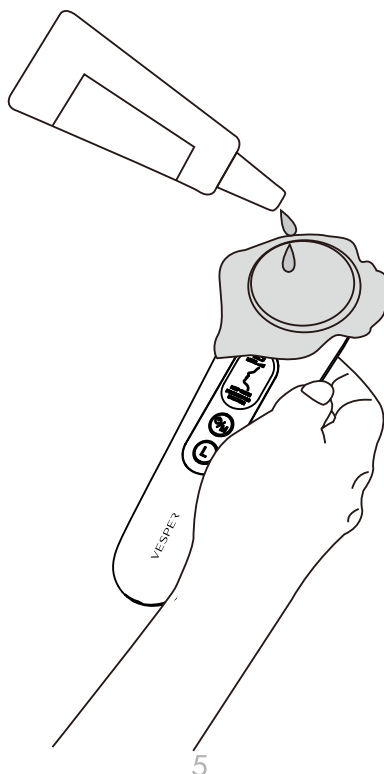

Coloque una almohadilla de algodón en el cabezal de terapia y humedézcala con loción exfoliante o limpiadora.


Nota: No utilice lociones tipo gel o crema.

2

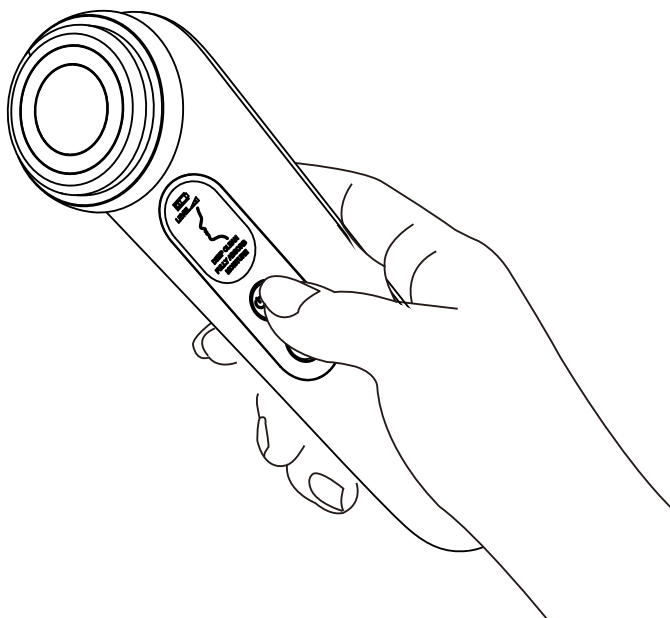


Presione y mantenga el botón de Encendido/Modo por dos segundos para prender el dispositivo. La pantalla LCD prenderá. El modo preestablecido es limpieza profunda.

3

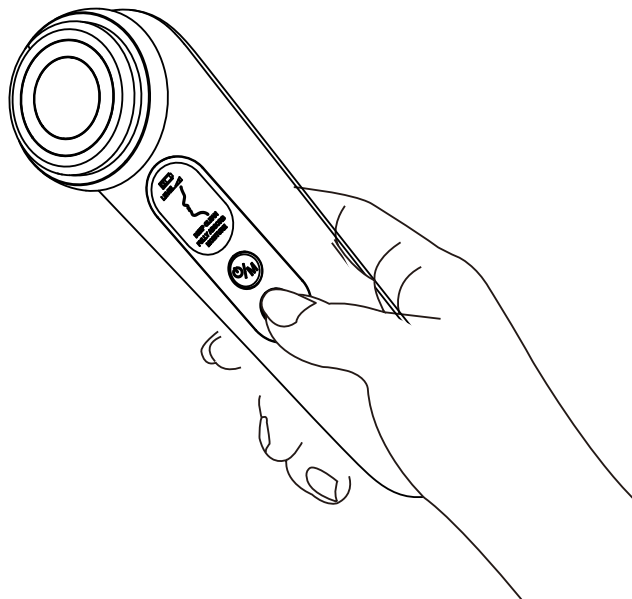

La intensidad predeterminada es la intensidad baja. Puede presionar el botón de intensidad para escoger una intensidad en concreto. Es recomendado empezar con la intensidad baja.

4

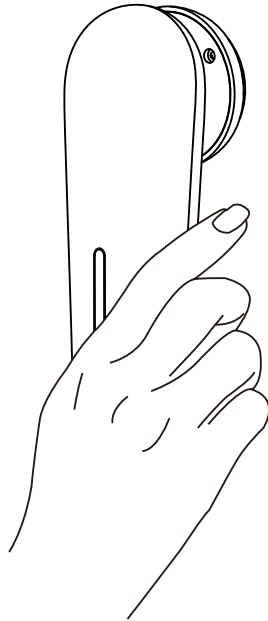

Sostenga el dispositivo y asegúrese de que su mano esté en contacto directo con el área de inducción de iones.

5



Coloque suavemente el cabezal de terapia en su rostro y haga movimientos lentos de manera circular.

6



Después del tratamiento, remueva la almohadilla de algodón y limpie los restos de loción del cabezal de terapia. Posteriormente, lave su cara con agua limpia.

Nota: No reúse la almohadilla de algodón para evitar cualquier tipo de problema en la piel.

Nota: No remplace las lociones con agua potable o mineral, o el efecto de la limpieza facial se verá reducido.

Nota: No deje el dispositivo en un solo lugar por más de 10 segundos. Debido a la micro corriente del EMS, puede sentir un ligero cosquilleo. Es normal y seguro de usar.

Nota: Asegúrese de que su mano esté en contacto directo con el área de inducción de iones, de lo contrario el dispositivo no funcionará.


MODO 2: ABSORCIÓN TOTAL

1




Limpie su cara, y aplique loción exfoliante o esencia para uso en el rostro.

2

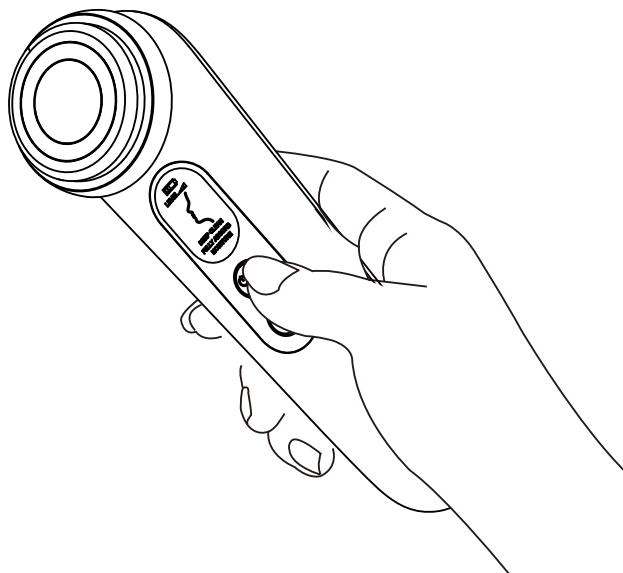


Presione y mantenga el botón de Encendido/Modo por 2 segundos para prender el dispositivo. La pantalla LCD prenderá. Presione de nuevo el botón de Encendido/Modo para seleccionar el modo de absorción completa. La luz LED roja se encenderá de manera automática.

3

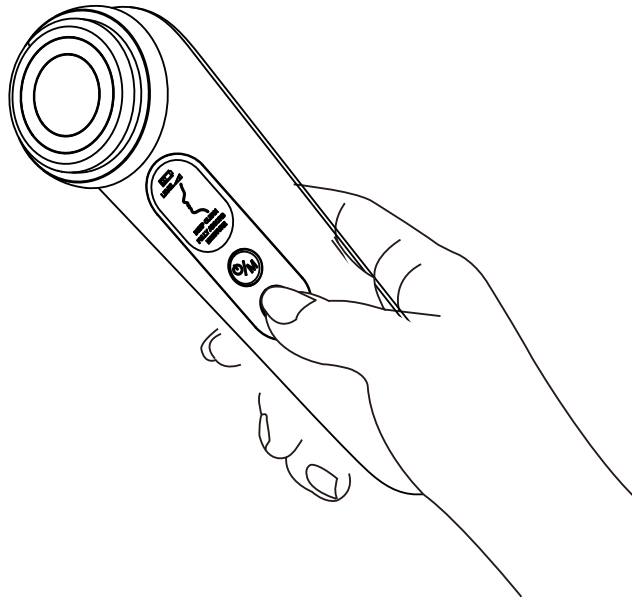

La intensidad predeterminada es la intensidad baja. Puede presionar el Botón de Intensidad para escoger una intensidad en concreto. Es recomendado empezar con la intensidad baja.

4

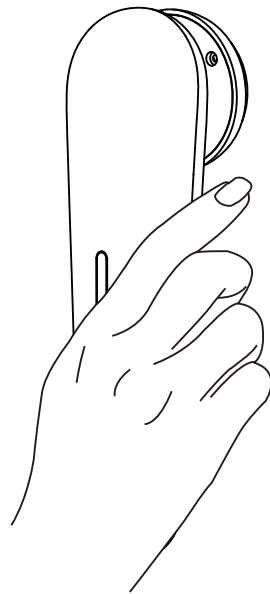


Sostenga el dispositivo y asegúrese de que su mano esté en contacto directo con el área de inducción de iones.

5



Coloque suavemente el cabezal de terapia en su cara y haga movimientos lentos de manera circular.

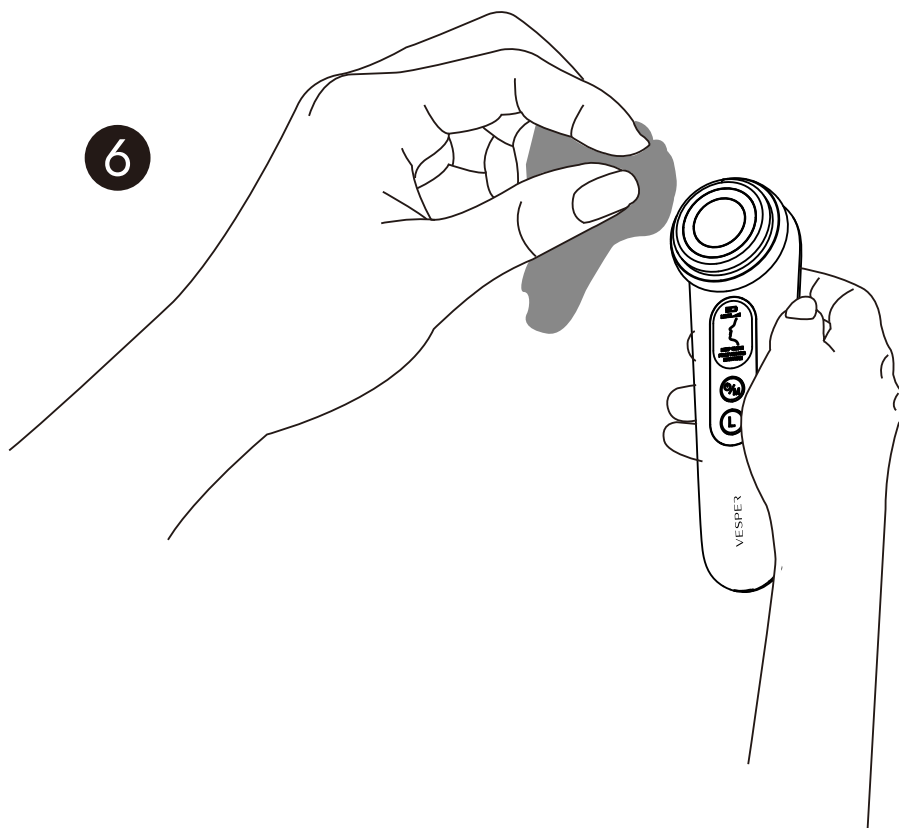

Después del tratamiento, limpie los restos de loción o esencia del cabezal de terapia.

Nota: Este modo no necesita almohadilla de algodón. Para obtener mejores resultados es recomendable la aplicación de productos hidratantes para el cuidado de la piel.

Nota: Si tiene dificultad moviendo el dispositivo, aplique más loción o esencia en su cara.


Nota: No deje el dispositivo en un solo lugar por más de 10 segundos. Debido a la micro corriente del EMS, puede sentir un ligero cosquilleo. Es normal y puede estar seguro de su uso.

Nota: Asegúrese de que su mano esté en contacto directo con el área de inducción de iones, de lo contrario el dispositivo no funcionará.


MODO 3: HIDRATACIÓN




Aplice una mascarilla o distribuya de manera uniforme crema o emulsión en su rostro.

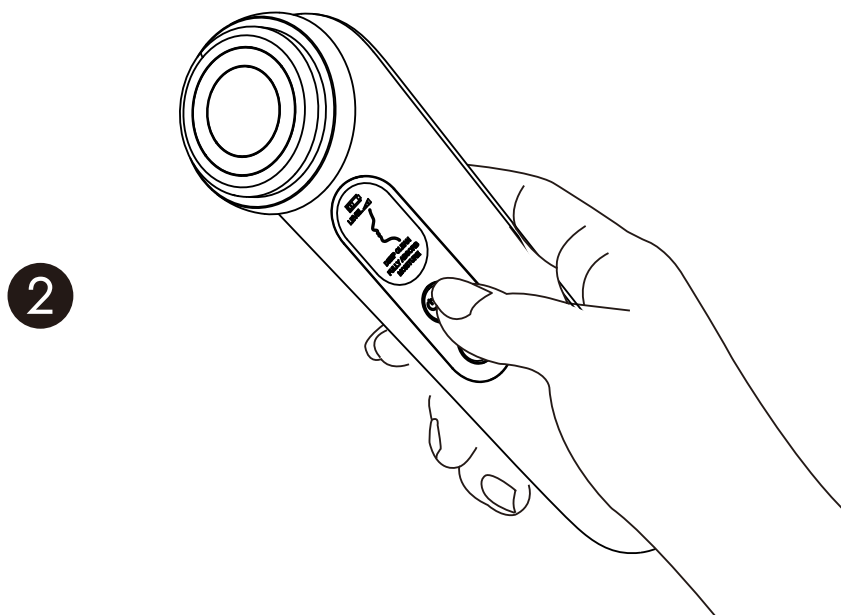

Presione y mantenga el Botón de Encendido/Modo por 2 segundos para encender el dispositivo. La pantalla LCD encenderá. Presione de nuevo el botón de Encendido/Modo para seleccionar el modo de hidratación. La luz LED azul encenderá de manera automática.

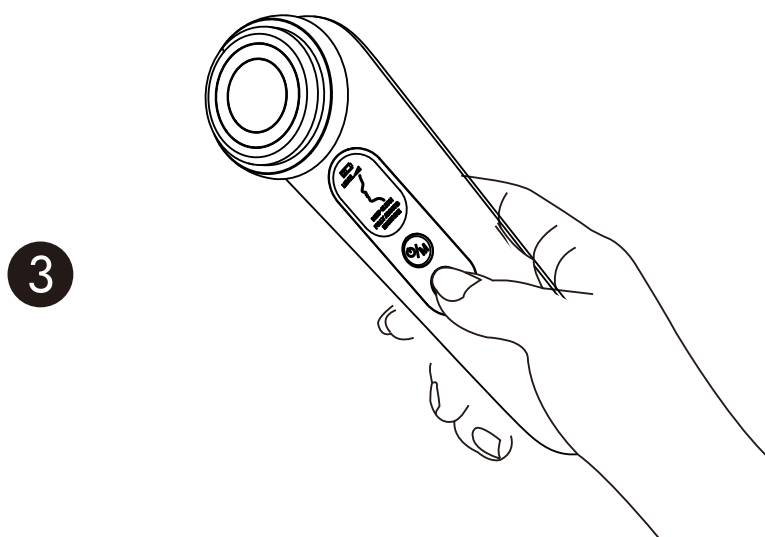


La intensidad predeterminada es la intensidad baja. Puede presionar el Botón de Intensidad para escoger una intensidad en concreto. Es recomendado empezar con la intensidad baja.

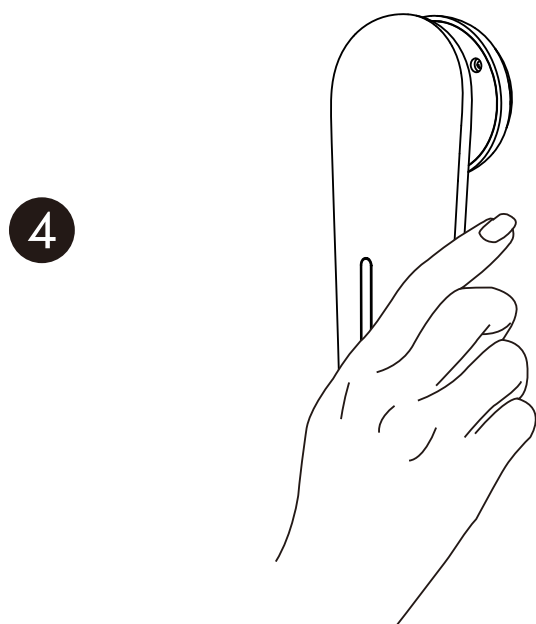

Sostenga el dispositivo y asegúrese de que su mano esté en contacto directo con el área de inducción de iones.



Coloque suavemente el cabezal de terapia en su cara y haga movimientos lentos de adentro hacia afuera, y de abajo hacia arriba.

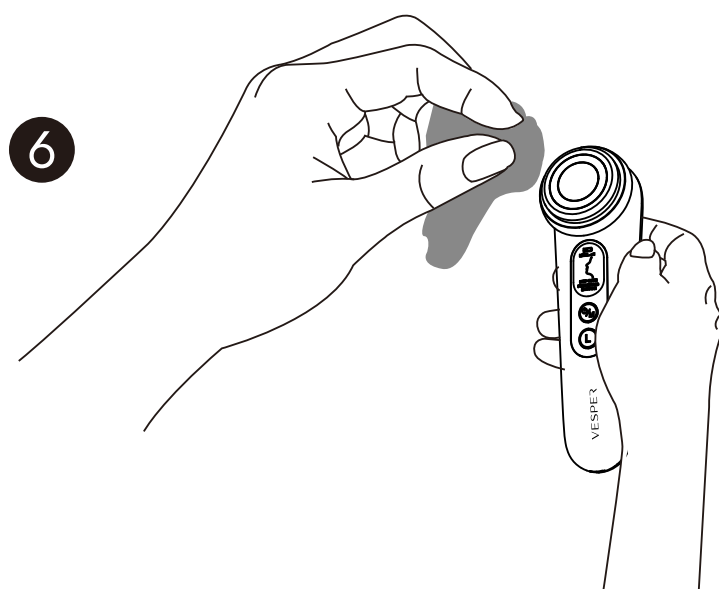

Después del tratamiento, limpie los restos de mascarilla, emulsión o crema del cabezal de terapia.

Nota: Este modo no necesita almohadilla de algodón. Para obtener mejores resultados es recomendable la aplicación de productos hidratantes para el cuidado de la piel.

Nota: Si tiene dificultad moviendo el dispositivo, aplique más mascarilla, emulsión o crema en su cara.

Nota: No deje el dispositivo en un solo lugar por más de 10 segundos. Debido a la micro corriente del EMS, puede sentir un ligero cosquilleo. Es normal y puede estar seguro de su uso.

Nota: Asegúrese de que su mano esté en contacto directo con el área de inducción de iones, de lo contrario el dispositivo no funcionará.

Sugerencia de Uso

	Tratamiento rápido	Tratamiento simple	Tratamiento completo
Tiempo	4 minutos	8 minutos	12 minutos
Modo	Hidratación	Hidratación + Limpieza profunda	Limpieza profunda + Absorción completa + Hidratación
Frecuencia de uso (recomendación)	Una vez al día	Una vez al día	Tres o cuatro veces por semana
Efecto	Rápidamente relaja la piel	Limpia profundamente la piel	Ayuda a la piel a absorber mejor los nutrientes para un rostro deslumbrante

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

1. Seque el dispositivo con un paño limpio después de cada uso
2. Guarde el dispositivo si no lo va a usar por un periodo prolongado
3. No moje el dispositivo con agua, no lo lave en el grifo o no lo meta en el agua
4. No use limpiadores corrosivos para limpiar el dispositivo
5. Ponga el dispositivo en un lugar seco, fresco y con sombra
6. No someta el dispositivo a impactos fuertes
7. No use el dispositivo si está dañado

ESPECIFICACIONES

Materiales: ABS + PC + Metal

Capacidad de la batería: 800 mAh

Tiempo de carga: 3 horas (aproximadamente)

Tiempo de trabajo continuo: 60 minutos (aproximadamente)

Temperatura de trabajo: Constante 45 °C/113 °F (Cabezal de terapia)

Corriente en modo de espera: <70 mA

Corriente: ≤683 mA

Potencia de salida: Max 2.5 W

Longitud de onda: Luz roja – 625 nm. Luz azul – 450 nm

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Reafirmante facial
- 1 x Anillo de fijación
- 1 x Cable de carga micro USB
- 1 x Manual de instrucciones

Solución de problemas

Problemas	Posibles causas	Soluciones
No enciende	Presione el botón de encendido por menos de 2 segundos	Presione el botón de encendido por 2 segundos
	Durante la carga	Desconecte el adaptador o el dispositivo
	Batería baja	Conéctelo a la corriente eléctrica para recargarlo
Falla en la carga (no se muestra el símbolo de batería en la pantalla LCD)	El cargador no está completamente conectado en el adaptador	Conecte correctamente el cable en el adaptador
	El cargador no está completamente conectado en el dispositivo	Conecte correctamente el cable en el dispositivo
	El cargador está dañado	Use otro cargador
El dispositivo se sobrecalentó	Se trabajo de manera continua por mucho tiempo	Apague el dispositivo y déjelo descansar por 1 hora por lo menos
No funciona	La mano no tiene contacto con el área de inducción de iones	Asegúrese de que la mano está en contacto con el área de inducción de iones
Siente un fuerte cosquilleo	Utilizó una intensidad demasiado fuerte	Baje la intensidad a una más adecuada
	No aplico suficientes lociones o esencias	Aplique más lociones o esencias

GARANTÍA VESPER

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Vesper.
- La unidad haya sido dañada – incluyendo pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Peru SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)
+56 22 840 5567

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

PERÚ

0800 56185
+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)
+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com