


OZŪ

Rechargeable & Portable Massage Gun
Pistola de Masaje Recargable Portátil

User Manual
Manual de Instrucciones

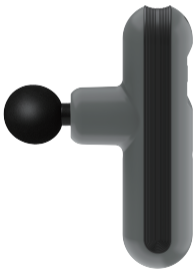

UM-027

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la Pistola de Masaje Recargable Portátil OZU. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futura referencia. En caso de requerir asistencia, contacte a nuestro equipo de soporte con su número de modelo y ticket de compra.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Al utilizar productos eléctricos especialmente cuando haya niños presentes se deben seguir las precauciones básicas de seguridad incluidas en este instructivo.
- Los niños no deben usar este producto sin supervisión de un adulto.
Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- El aparato sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación (adaptador de corriente no incluido) recomendado.
- Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PRECAUCIONES

- Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y evite utilizar este producto durante períodos prolongados para prevenir molestias musculares debido a un masaje excesivo.
- No utilice este producto si la zona a masajear ha sido sometida a cirugía, presenta heridas, enrojecimiento, inflamación, congestión u otros síntomas incómodos.
- No deben usar este producto personas con enfermedades cardíacas, antecedentes médicos graves, enfermedades agudas, afecciones dermatológicas, tumores malignos, trastornos hemorrágicos, osteoporosis, problemas en tejidos blandos, secuelas de accidentes cerebrovasculares u otras anomalías físicas.
- Personas con movilidad reducida, malestar físico o mental, o discapacidad intelectual no deben utilizar este producto sin la supervisión y recomendación de un médico.
- El uso de este masajeador está contraindicado para mujeres embarazadas o en período de menstruación, salvo indicación médica.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños al guardarlo. Está prohibido el uso de este producto en niños menores de 8 años. Los niños de 8 a 12 años deben utilizarlo bajo la supervisión y cuidado de un adulto responsable.
- Este producto es un dispositivo de salud para uso doméstico. No es un dispositivo médico y no es apto para diagnóstico, tratamiento u otros fines médicos o comerciales.
- Antes de usar, retire cualquier joya u objeto que pueda interferir con la zona de masaje.
- Si experimenta dolor o molestias en el área de masaje durante el uso, detenga inmediatamente su uso.
- Si el producto presenta algún fallo durante el uso, apáguelo de inmediato, desconéctelo de la fuente de energía y comuníquese con el servicio al cliente. No intente desarmar ni reparar el producto por su cuenta.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas

(incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos relevantes, a menos que estén supervisados e instruidos en el uso de este producto por una persona responsable de su seguridad.


Consulte a su médico antes de usar el masajeador si:

- Está recibiendo tratamiento médico o se siente físicamente mal.
- Sufre de hipertensión, enfermedades del corazón, arteriosclerosis cerebral o trombosis cerebral.
- Tiene tumores malignos.
- Está embarazada, menstruando o sufre de osteoporosis.
- Usa un marcapasos o dispositivo médico implantado.
Padece una enfermedad aguda.

ADVERTENCIAS

- No use este producto si se siente mal.
- Limite su uso a 10 minutos de masaje continuo con calentamiento. Después de usarlo, espere al menos 30 minutos antes de volver a usarlo.
- No utilice el producto si su embalaje está dañado.
- Evite utilizar el producto antes o después de comer para prevenir efectos adversos.
- Si el producto ha sido trasladado desde un área de almacenamiento a baja temperatura a un ambiente más cálido, deje que alcance la temperatura ambiente durante una hora antes de usarlo para evitar fallos debido a la condensación de humedad.

PARTES DE LA PISTOLA DE MASAJE

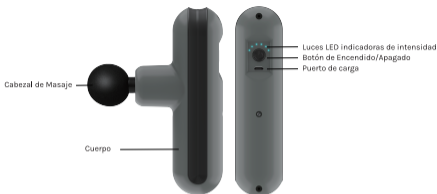

Las imágenes de productos, accesorios, interfaz de usuario y otras ilustraciones en este manual son diagramas esquemáticos y son solo para referencia. Debido a mejoras y actualizaciones, el producto real puede diferir ligeramente de los diagramas esquemáticos. Consulte el producto real.

INTERFAZ DE CONTROL



MODO DE OPERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Encendido

Asegúrese de que el producto esté completamente cargado antes de encenderlo.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. La primera luz LED azul se encenderá y la intensidad predeterminada será 1.

Ajuste de Intensidad

En modo predeterminado, presione brevemente el botón de encendido para aumentar la intensidad:

- Primera presión: intensidad nivel 2 (dos luces LED azules encendidas).
- Segunda presión: intensidad nivel 3 (tres luces LED azules encendidas).
- Tercera presión: intensidad nivel 4 (cuatro luces LED azules encendidas).
- Cuarta presión: intensidad nivel 5 (cinco luces LED azules encendidas).
- Quinta presión: intensidad nivel 6 (seis luces LED azules encendidas).

Presione brevemente el botón de encendido para recorrer los niveles de intensidad de 1 a 6 y luego de 6 a 1.

Temporizador

El temporizador predeterminado es de 10 minutos. El producto se apagará automáticamente después de este tiempo.




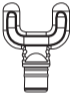
Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para apagar el dispositivo. El producto también se apagará automáticamente al finalizar el temporizador.

MÉTODO DE CARGA

El puerto de carga está diseñado para utilizar un cable USB Tipo C. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 5V 1A para cargarlo. Durante la carga, las 6 luces LED azules parpadearán alternativamente. Cuando esté completamente cargado, las 6 luces LED permanecerán encendidas.

CABEZALES DE MASAJE

Cabezal Plano	Cabezal esférico	Cabezal de bala	Cabezal en forma de U
			
Adecuada para relajar varias partes musculares.	Ideal para masajear diversas zonas musculares, palmas y plantas de los pies.	Indicado para impactar tejidos profundos.	Especialmente diseñado para masajear el tendón de Aquiles, cuello y columna vertebral.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Utilice el cable de carga proporcionado con el producto y un adaptador compatible para cargarlo.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de agua, fuego y ambientes corrosivos.
- Después de su uso, almacene el producto en un lugar seco y

ventilado, protegido de la luz solar directa.

Limpieza del Producto:

Para limpiar la superficie del producto, desconecte el cable de carga y use un paño ligeramente humedecido con agua o alcohol al 75%. No enjuague el producto directamente con agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de fallas, consulte las siguientes verificaciones. Si el problema persiste, desconecte el producto y busque asistencia técnica profesional. No intente desarmar ni reparar el producto usted mismo.

Problema	Posible causa	Solución
El masajeador no enciende	Falta de carga o uso incorrecto del botón de encendido	Cargue el producto o confirme que presiona el botón por 1 segundo
El producto no carga	Cable de carga desconectado	Reinsertar el cable de carga y asegurar el contacto adecuado
El dispositivo se detuvo repentinamente	Batería baja o finalización automática del temporizador	Cargue el producto o reinicielo

ESPECIFICACIONES

- Nombre del Producto: Pistola de Masaje Recargable Portátil
- Modelo: UM-027
- Voltaje de Carga: 5V 1A
- Especificaciones de Batería de Litio: 7,4V 1200 mAh
- Potencia Nominal: 5W
- Tiempo de Uso: 10 minutos
- Peso Neto: 0,38 kg
- Dimensiones: 18 x 8,5 x 5 cm
- País de Origen: China

Contenido de la caja

- 1 x Pistola de masaje
- 4 x Cabezales de masaje
- 1 x Cable de Carga USB Tipo-C
- 1 x Manual de Instrucciones
- 1 x Bolsa de Tela

Garantía OZU

OZU garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por OZU, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. OZU no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

Condiciones de la garantía

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de OZU se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

Términos de la garantía

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del período indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por OZU (por ejemplo, en sitios de subastas online), el período de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie o

lote del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, OZU lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica OZU puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de OZU.

La garantía de OZU provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

Exclusiones

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo, pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie, lote o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por OZU .
- La unidad haya sido dañada, incluyendo, pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.

- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la marca OZU que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Perú SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano.

Servicio al Cliente

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a OZU o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente, por favor tenga a mano al contactarse con OZU el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

support@ozulife.com
www.ozulife.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VREI90213FY2

PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú. RUC 20603796021

COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385

