

# VESPER

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**REAFIRMANTE FACIAL  
CON RADIOFRECUENCIA**

FV-002

Gracias por adquirir el Reafirmante Facial con Radiofrecuencia. Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar y siga correctamente las instrucciones.

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

El Reafirmante Facial con Radiofrecuencia es un dispositivo de belleza diseñado para ayudarle a resolver varios problemas en la piel como líneas finas, apariencia opaca, grasa, flacidez, deshidratación, etc.

La radiofrecuencia es un método de tratamiento de la piel no invasivo con pocos efectos secundarios.

Promueve la regeneración del colágeno y ayuda a reducir las líneas finas y arrugas mediante calentamiento eléctrico.

Mientras tanto, la luz LED nano roja puede promover el metabolismo, mejora la actividad celular y aumenta la elasticidad de la piel.

Las dos tecnologías trabajan juntas para rejuvenecer la piel y le harán lucir más joven.

Usar regularmente este Reafirmante Facial le ayudará a mantener una apariencia joven por más tiempo.

### **Posibles efectos secundarios y riesgos**

El riesgo más probable de la terapia de radiofrecuencia es la sobreexposición, la cual puede tener como consecuencia una quemadura. Para evitarlo en ningún caso exceda el tiempo recomendado de uso o el tiempo predeterminado de uso.

Además detenga su uso si siente molestias.

Otros efectos secundarios pueden ser enrojecimiento, inflamación, dolor, o manchas. Use el dispositivo con precaución en caso de notar alguno de estos efectos secundarios

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


1. No use el dispositivo en personas con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos activos en el cuerpo
2. No use el dispositivo si cuenta con implantes permanentes como placas o tornillos, implantes de silicona o inyecciones en el área a tratar
3. No use el dispositivo si fue diagnosticado o padece de cáncer
4. No use el dispositivo si ha recibido tratamientos de quimioterapia o electroterapia en los últimos meses
5. No use el dispositivo si es propenso o padece de herpes recurrente en el área a tratar.
6. No use el dispositivo si su piel es fotosensible
7. No use el dispositivo si cuenta con algún síntoma adverso al usarlo y consulte a su médico.
8. No use el producto si ha consumido medicamentos para el cuidado de la piel prescritos por su médico en los últimos 6 meses.
9. No use el producto en áreas donde ha tenido una cirugía en los últimos 3 meses
10. Verifique que el dispositivo se encuentre en buen estado y evite su uso en los siguientes casos:

-En caso de que utilice con algún otro accesorio o aditamento diferentes a los contenidos en el empaque original.

-En caso de que la entrada eléctrica o el cable se encuentren dañados.

- En caso de que el dispositivo emita humo o emita olor a quemado al usarlo.
- En caso de que presente fallas o funcione de manera anómala.
- En caso de que la carcasa del dispositivo se encuentre dañada, rota, golpeada o fuera de su lugar.
- En caso de que el dispositivo se encuentre húmedo.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

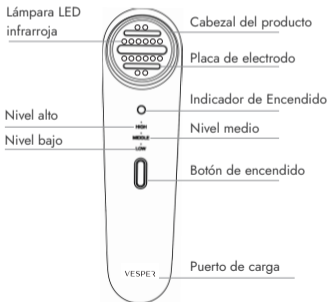

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Radiofrecuencia + Luz roja:** Directamente trabajan en la dermis para promover la regeneración del colágeno.

**3 niveles disponibles:** Bajo Medio y Alto, personalice su rutina de tratamientos.

**Materiales premium:** No irritan la piel, se puede usar en la mayoría de los tipos de piel.

**Multifuncional:** Ayuda en varios problemas en la piel como líneas de edad, bolsas y piel maltratada.

**Monitor de temperatura:** Mantiene la piel en un rango de temperatura seguro.

**Sensor de piel:** El dispositivo se encenderá automáticamente cuando los 4 electrodos entren en contacto con la piel.

**Indicador de batería baja:** Cuando el dispositivo se encuentre bajo de batería se mostrará el indicador.

**Compacto y elegante:** El diseño del dispositivo es conveniente para el uso en casa o para llevarse de viaje.

### Método de carga

La batería puede descargarse durante el traslado, cargue la batería del dispositivo antes de usarlo.

1. La luz indicadora parpadeará cuando la batería se encuentre baja, lo cual le recordará cargar el dispositivo.
2. Conecte el dispositivo con un adaptador de 5V DC 1A (no incluido) usando el cable USB tipo C a la corriente. El indicador de batería se mantendrá en color rojo hasta que la carga esté completada y el indicador cambie a color azul.

Nota: El dispositivo se puede usar mientras se encuentra cargándose

3. Usualmente el dispositivo tarda 2.5 horas (aproximadamente) en llegar a su carga completa. El dispositivo puede ser usado por alrededor de 120 minutos con una sola carga.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Remueva todo el maquillaje, limpie su rostro y séquelo bien.



2. Aplique una delgada capa de gel al área que va a tratar.

Nota: Puede usar el gel de su preferencia (soluble en agua) que le ayudara a que el dispositivo se pueda desilizar fácilmente y ayuda a que la conducción eléctrica sea mejor para una mejor eficiencia y seguridad. Siempre aplique una capa de gel (o varias) en el área de tratamiento



3. Presione y sostenga el botón de encendido por 2 segundos para activar el dispositivo. El nivel predeterminado es Bajo (LOW) y el indicador también se encenderá.



4. Presione el botón de encendido brevemente para elegir un nivel de intensidad, el indicador correspondiente al nivel se encenderá.



Nota: La intensidad se incrementa gradualmente entre nivel bajo, medio y alto. Utilice el nivel bajo (LOW) antes que otros niveles (Se recomienda utilizar intensidades más altas para una mayor efectividad siempre y cuando se sienta cómodo el uso del producto en los niveles más bajos)

5. Suavemente y con gentileza aplique el dispositivo a su piel. La luz roja se encenderá al contacto y con cuidado masajee su piel así como muestra la imagen. Tendrá una sensación cálida y relajante en el área donde se encuentre el producto mientras dure el proceso.



Nota: Debe asegurarse que las 3 placas de electrodos tengan contacto con su piel durante el tratamiento



## PASOS PARA TRATAMIENTO Y FUNCIONES



1. Frente: Ayuda a recuperar la firmeza de la piel
2. Mejilla izquierda: Reduce las líneas finas y reafirma la piel
3. Mejilla derecha: Reduce las líneas finas y reafirma la piel
4. Labio superior: Reafirma la piel y reduce las arrugas

5. Barbilla: Reafirma la piel y el contorno de la cara

6. Cuello: Mejora la tersura

6. Utilice el dispositivo por al menos 15 minutos cada vez.

Conforme se libere la energía de radiofrecuencia y se incremente la intensidad, sentirá caliente en el área que este tratando y su piel enrojecerá ligeramente durante el proceso.

Nota: Antes de usar puede mover el dispositivo lenta o rápidamente para encontrar su ritmo y velocidad preferida.

Nota: Si el dispositivo no se encuentra en operación por 5 minutos se apagará automáticamente para ahorrar energía.



7. Al finalizar, aplique humectante de piel en el área tratada.



## **ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA**

1. Apague el dispositivo después de cada uso y limpie la superficie con un paño seco. Use un pañuelo desechable o una toalla para limpiar suavemente los restos de gel del cabezal y la superficie del producto. Puede usar una solución de limpieza basada en alcohol al 70%.
2. Para evitar dañar su dispositivo, no utilice productos que contengan acetona o abrasivos para limpiarlo
3. Después de limpiarlo colóquelo en su empaque original y guárdelo en un lugar sombreado y fresco.
4. El dispositivo no es a prueba de agua. Manténgalo fuera del agua y no sumerja ninguna de sus partes en ella.

5. El dispositivo cuenta con una batería integrada. Cuando el dispositivo no está en uso por un largo periodo de tiempo por favor recárguelo al menos cada 3 meses para mantener la vida útil de la batería.

6. Nunca intente abrir o reparar el dispositivo por su cuenta.

## ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: Dispositivo de Radiofrecuencia con Luz Roja

Material: ABS + PC + Metal

Entrada: 5V DC 1A

Salida: 1 MHz  $\pm$  30%; Max 12 W

Capacidad de la batería: 1600 mAh

Amplitud de la frecuencia: Luz roja - 620nm  $\pm$  20nm

Luz azul 460  $\pm$  20nm

Temperatura en funcionamiento: 10° C ~ 35° C

Temperatura en almacenamiento: -40° C ~ 70° C

Humedad relativa en funcionamiento: 35 ~ 80% rH

Humedad relativa en almacenamiento: 10 ~ 90% rH

Tamaño del producto: 167\*45\*43 mm

## CONTENIDO DE LA CAJA

## **GARANTÍA VESPER**

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

## **CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza,

incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

## **TÉRMINOS DE LA GARANTÍA**

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

## EXCLUSIONES

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Vesper.
- La unidad haya sido dañada – incluyendo pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue

diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.

- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Peru SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano



## SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

### CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)

+56 22 840 5567

16

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com

### PERÚ

0800 56185

+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com

### MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)

+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com

### COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com