

VESPER

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**LIMPIADOR ULTRASÓNICO
FACIAL REAFIRMANTE**

FV-013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de trabajo Nominal: 5V

Corriente Nominal: 800mA

Frecuencia de vibración: <math><3\text{H } 25 \pm 5\text{KHz}</math>


Tiempo de uso recomendado: 5 minutos

Tiempo de carga: <math><3\text{H}</math>

Resistencia al agua: IPX5

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL PRODUCTO

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Cubierta protectora | 6. Barra de sensores |
| 2. Espátula | 7. Luz indicadora de carga/
batería baja |
| 3. Indicador Modo Limpieza | 8. Entrada de carga USB |
| 4. Botón de encendido/
apagado | 9. Cubierta de silicona |
| 5. Indicador Modo
Reafirmante | 10. Cable USB tipo C |
| | 11. Paño de limpieza |

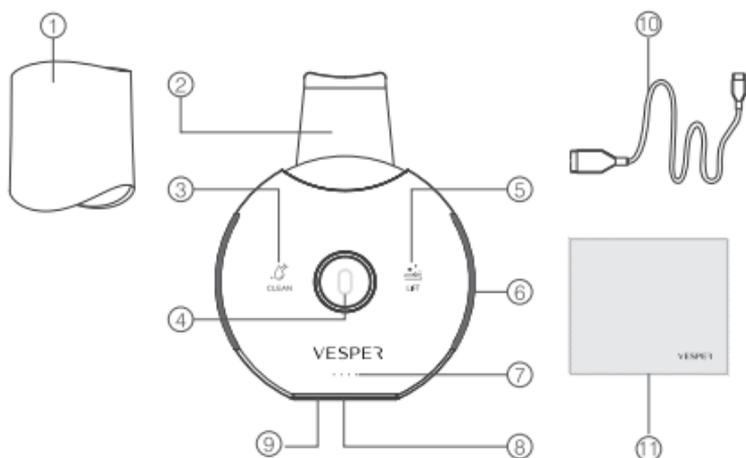

Nota: Este producto contiene una batería de litio integrada y solamente puede ser cargado con un cable USB tipo C (incluido).

CARACTERÍSTICAS

El Limpiador Ultrasónico Facial Reafirmante FV-013 utiliza vibraciones ultrasónicas y tecnología de iones positivos para que el agua atomizada penetre al tejido profundo de la piel para realizar una exfoliación efectiva y remover el polvo de la piel. Combina tecnología EMS durante su tratamiento con gel cosmético y puede refrescar, revitalizar y humectar su piel para una piel más elástica y suave. El diseño es compacto y redondo para facilitar su desplazamiento.

INDICACIONES

Modo Limpieza (CLEAN)	Presione el botón de Encendido/Apagado/Modo hasta escuchar un sonido. Estará en el Modo Limpieza (CLEAN) y la luz indicadora estará encendida
Modo Reafirmante (LIFT)	Estando en el Modo Limpieza (CLEAN) presione el botón de Encendido/Apagado/Modo hasta escuchar un sonido. Estará en el Modo Reafirmante (LIFT) y la luz indicadora estará encendida
Apagado	El dispositivo cuenta con un sistema de auto apagado después de 5 minutos, con 5 sonidos, las luces se apagarán. Para apagar el dispositivo manualmente: En el modo Reafirmante, presione el botón de encendido/apagado/modo hasta escuchar un sonido
Indicador de batería baja	3 sonidos en un intervalo de 10 segundos indican que la batería se está agotando. El dispositivo se apagará automáticamente después de 3 rondas de sonidos. Durante el uso, 4 luces indicarán la carga de la batería y una luz encendida indica que la batería se encuentra al 25%
Carga	Durante la carga las luces en el indicador parpadean en secuencia
Carga completa	Todas las luces en el indicador se mantienen encendidas

MODO DE USO

Modo de Limpieza



1. Moje su rostro antes de usar el producto



2. Encienda el dispositivo y colóquelo en modo de limpieza (CLEAN)



3. Tome el dispositivo (con el pulgar en el botón circular y el resto de la mano tocando la barra de sensores). Suavemente deslice la espátula sobre su rostro para exfoliar



4. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos


Modo de Rejuvenecimiento



1. Limpie la espátula y limpie su rostro con agua



2. Aplique productos de cuidado facial a su rostro

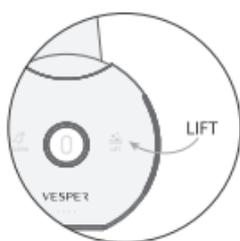

3. Encienda el dispositivo y presione el modo de Encendido/Apagado/Modo hasta seleccionar el Modo de Rejuvenecimiento



4. Tome el dispositivo (con el pulgar en el botón circular y el resto de la mano tocando la barra de sensores). Gentilmente levante y deslice hacia arriba para el tratamiento



5. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos de uso



6. Limpie la espátula y cúbrala con la cubierta protectora

Nota: El limpiador funcionará por 5 minutos, durante los cuales el modo se puede cambiar por otros 5 minutos. El dispositivo se apagará automáticamente después.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Nunca use el dispositivo:

- Si tiene órganos artificiales implantados
- Si ha tenido alguna cirugía o ha sufrido de quemaduras en la piel en el área a tratar en un mes antes del uso del dispositivo
- Si su piel se encuentra inflamada, raspada, quebrada o si presenta alergia a la terapia electromagnética
- Directamente en los ojos
- En la misma área por un tiempo prolongado

Antes de su uso:

- Remueva las prendas de ropa en el área a tratar
- Remueva todos los objetos metálicos de su piel, como su reloj de mano, lentes o joyería

<p>⊘ No deje el dispositivo desatendido mientras se encuentra encendido.</p> <p>ON </p>	<p>⊘ No desmonte el dispositivo por su cuenta.</p> 
<p>⊘ No use el dispositivo si ha recibido un golpe o se ha caído al piso, a menos que se haga una revisión de seguridad.</p> 	<p>⚠ Mantenga el dispositivo y las conexiones eléctricas lejos de fuentes de calor o fuego</p> 

LIMPIEZA

- Enjuague la espátula con agua y limpie con una toalla seca después de cada uso.
- No sumerja el dispositivo en agua o líquidos.

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el dispositivo seco y limpio.
- Mantenga el dispositivo lejos de altas temperaturas
- Manténgase fuera del alcance de los niños

PREGUNTAS FRECUENTES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo falla o deja de funcionar:	1. La batería puede encontrarse agotada 2. Puede existir algún problema en el dispositivo	1.Cargue el dispositivo por 3 horas e inténtelo de nuevo. 2.Contacte al Servicio Técnico Autorizado de su país para conseguir ayuda si el dispositivo aún presenta el problema después de haberlo cargado completamente.
La vibración es débil.	La batería se encuentra baja	Cargue el dispositivo por 3 horas e inténtelo de nuevo.

GARANTÍA VESPER

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo, en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de

serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo, pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Vesper.

- La unidad haya sido dañada – incluyendo, pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Perú SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)

+56 22 840 5567

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

PERÚ

0800 56185

+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)

+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

www.vesperstore.com