


MANUAL DE USUARIO

VESPER

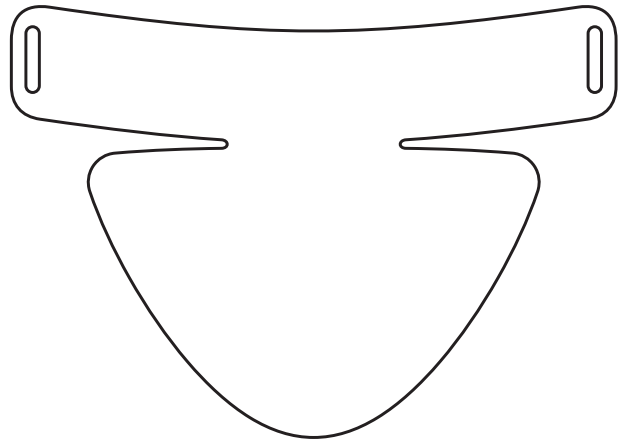

MÁSCARA DE FOTONES LED PARA CUELLO Y PECHO PHOTON LED MASK FOR NECK AND CHEST

FV-020

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.
LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE USARLO
Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro. Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

PRECAUCIONES

Limpie la piel del área a tratar antes de usar el dispositivo para asegurar mejores resultados y comodidad.

Coloque la banda elástica en la máscara según las indicaciones antes de iniciar la sesión.

Conecte el cable al controlador y encienda el dispositivo.

Aplique la máscara en la zona del cuello, ajuste la banda y realice la sesión con el modo deseado.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos para activar el dispositivo.

Pulse brevemente el botón para cambiar de modo y seleccionar la duración deseada. El dispositivo cuenta con apagado automático por temporizador para mayor seguridad.

La luz infrarroja no es visible a simple vista; un tenue resplandor en los diodos es normal.


ADVERTENCIAS

No utilice el dispositivo si presenta sensibilidad a la luz sin realizar previamente una prueba de sensibilidad.
No lo use durante el embarazo, ya que los posibles riesgos no están determinados.
No lo utilice si padece epilepsia, ya que la exposición a ciertas luces podría inducir convulsiones.
El dispositivo no es resistente al agua. Evite el contacto con líquidos en cualquier parte del mismo.
No lo use si está bajo tratamiento con medicamentos que puedan provocar fotosensibilidad.
No utilice el dispositivo mientras duerme, camina o conduce.

Introducción del producto

Felicidades por la compra de su Máscara de Fotones LED para Cuello y Pecho Vesper. Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta en el manual o si necesita más asistencia, por favor contacte a nuestro SERVICIO POSTVENTA indicando el número de modelo y con su comprobante de compra a la mano.

Partes del Aparato

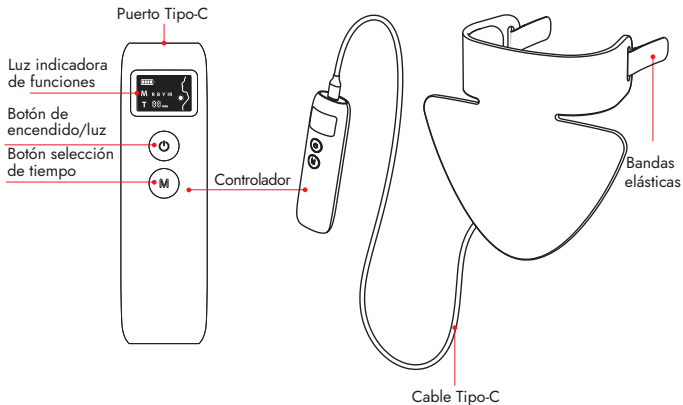

Funciones del producto

Este dispositivo utiliza luz de 5 longitudes de onda diferentes, y sus funciones principales son las siguientes:

Luz roja: longitud de onda de 630 nm \pm 10 nm. Es una luz bioactiva caracterizada por alta pureza, alta intensidad y densidad uniforme, eficaz en el cuidado de la piel y la salud. Aumenta la vitalidad celular, acelera la circulación sanguínea, estimula el metabolismo, favorece la regeneración del colágeno y del tejido fibroso, mejorando la elasticidad y el aspecto apagado de la piel, con efectos antienvjecimiento, antioxidantes y reparadores.

Luz azul: longitud de onda de 450 nm \pm 10 nm. Coincide con el pico de absorción de la porfirina, un metabolito de Propionibacterium acnes. Tras la excitación de la porfirina, se genera oxígeno activo en gran cantidad, creando un entorno altamente oxidativo que elimina esta bacteria, mejorando y tratando el acné.

Luz amarilla: longitud de onda de 580 nm \pm 10 nm. Mejora la función de intercambio de oxígeno en las células cutáneas, favorece la microcirculación, descompone y diluye el pigmento, estimula el crecimiento celular y contribuye a suavizar la piel, iluminar el tono, reparar y reducir arrugas.

Luz infrarroja: longitud de onda de 850 nm \pm 10 nm. Estimula la producción de colágeno, acelera el metabolismo cutáneo, ilumina el tono, reduce el tamaño de los poros y contribuye a un aspecto más juvenil.

Luz roja y azul combinadas: activan de manera sinérgica el colágeno, eliminan el acné y generan un doble efecto iluminador, acelerando el ciclo metabólico, reduciendo la opacidad, cerrando poros delicados y revitalizando la piel.

Cómo usar

Conecte el controlador a un adaptador de corriente calificado (no incluido) mediante el cable de carga tipo C.
Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos para iniciar el funcionamiento en modo luz roja.
Pulse brevemente el botón para alternar entre los modos de luz roja, azul, amarilla, infrarroja o la combinación de luz roja y azul.
Coloque la máscara en el cuello y ajuste las bandas elásticas para mantenerla en posición.
El dispositivo cuenta con una función de temporizador que apaga automáticamente el aparato al finalizar el tiempo configurado.
Si desea reiniciar el uso, mantenga nuevamente presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos.

1. Limpie la piel de la zona a tratar antes de usar el dispositivo para lograr una experiencia más cómoda.
2. Coloque la banda elástica en la máscara según las indicaciones.
3. Conecte el cable al controlador y encienda el dispositivo.

4. Aplique la máscara en la zona correspondiente, ajuste la banda y disfrute de la sesión.
 5. Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos para activar el dispositivo. El modo predeterminado es luz roja.
 6. Pulse brevemente el botón para cambiar de modo y seleccione la duración deseada. Pulse brevemente para seleccionar la duración.
 7. El dispositivo cuenta con función de temporizador para mayor seguridad. Al finalizar el tiempo configurado, se apagará automáticamente. Si desea reiniciarlo, mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos.
- Los modos de iluminación son los siguientes:
① Luz roja
② Luz amarilla
③ Luz azul
④ Luz roja y azul
⑤ Luz infrarroja
- El modo de luz roja y azul se percibe de color púrpura a simple vista.
- La luz infrarroja es invisible en condiciones normales. En entornos especiales puede observarse un ligero resplandor rojo en los diodos, lo cual es un fenómeno normal

Limpieza, Mantenimiento y Almacenamiento

Limpie el dispositivo con un paño seco después de cada uso. No lo enjuague bajo el agua. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y sombreado, lejos de la luz solar directa y altas temperaturas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
No intente abrir ni reparar el dispositivo usted mismo. En caso de mal funcionamiento, contacte al servicio de atención al cliente.
Después de cada uso, guarde el dispositivo en la bolsa incluida.

Soluciones a problemas comunes

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo no enciende	Batería descargada	Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo
El dispositivo se apaga solo	Temporizador automático activado	Reinicie presionando el botón de encendido durante 1,5 segundos
No se percibe luz infrarroja	Longitud de onda invisible al ojo humano	Verifique el funcionamiento con el ligero resplandor en los diodos, lo cual es normal
Carga muy lenta	Adaptador de corriente no calificado	Use un adaptador de 5 V– 1 A certificado
No se observan mejoras en la piel	Uso irregular o insuficiente	Utilice el dispositivo de acuerdo con las instrucciones y de forma constante

Baterías

Este aparato contiene una batería recargable no sustituible por el usuario.

Información ambiental / Disposición final



Este aparato contiene una batería recargable. Para proteger el medio ambiente, no deseche este producto con la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, la batería debe ser extraída y desechada de forma segura. Para extraer la batería, consulte a un profesional. Deseche la batería por separado en un punto de reciclaje de baterías. El resto del aparato debe ser entregado en un punto de recogida de residuos eléctricos.

Servicio Postventa y Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.
La garantía cubre defectos de fabricación.
La garantía no cubre daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.
Para reclamar la garantía, conserve el comprobante de compra y contacte al servicio de atención al cliente autorizado.

Información de contacto de Servicio al Cliente

Sitio web: www.vesperstore.cl
Soporte: contacto@ventisbrands.com

Especificaciones

Modelo: FV-020
Voltaje de entrada: 5 V– 1 A
Potencia nominal: 3.5 W
Capacidad de la batería: 2600 mAh
Tiempo de carga de la batería: aproximadamente 4 horas
Tiempo de uso con carga completa: aproximadamente 2 horas
Hecho en China

Contenido de la caja

1 x máscara de fototerapia para cuello y pecho
1 x controlador
1 x cable de carga tipo C
2 x bandas elásticas (izquierda y derecha)
1 x manual de instrucciones

IMPORTER & DISTRIBUTOR / IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4. MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcadía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385