

mint

MANUAL DE USO



MÁSCARA FACIAL LED 7 EN 1

7 in 1 Led Facial Mask

ANTES DE USAR EL APARATO LEE ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD Y CONSERVALAS PARA FUTURA REFERENCIA

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES (Lo que NO debes hacer)

Uso exclusivo: Utiliza la máscara únicamente como se describe en este manual. Cambiar su modo de uso puede provocar fallos en el sistema o causar un accidente.

Condiciones especiales: Si tienes alguna condición médica o dermatológica activa, o estás bajo tratamiento específico, utiliza el dispositivo solo bajo la guía o supervisión de un especialista (como tu dermatólogo).


Cuidado del cable: No enrolles el cable de alimentación alrededor del conector. Evita doblarlo de forma tosca, torcerlo, estirarlo o colocar objetos pesados sobre él.

Temperaturas extremas: No dejes el dispositivo en lugares con altas temperaturas. Mantén la máscara completamente alejada del fuego para evitar riesgos de sobrecalentamiento, cortocircuitos o descargas eléctricas.

Protección infantil: Este dispositivo no es un juguete. No permitas que lo usen niños y guárdalo siempre fuera de su alcance.

Cero líquidos: No sumerjas el equipo en agua ni lo laves directamente bajo el grifo.

Importante: Esta máscara está fabricada con un circuito impreso flexible en su interior. Realizar las acciones que se muestran en esta imagen, puede generar una presión excesiva o doblarla de forma extrema, lo que podría romper el circuito o causar un cortocircuito.

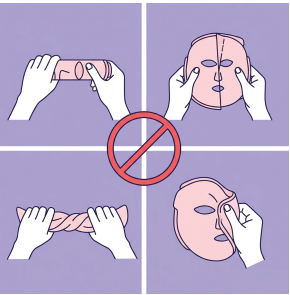

Si esto ocurre, las luces dejarán de encender o el dispositivo presentará fallos en su rendimiento. Manipula tu equipo con cuidado para asegurar su máxima eficacia y larga vida útil.

PUNTOS DE ATENCIÓN (Para un mantenimiento óptimo)

Rutina personal: Esta tecnología está diseñada para tu uso diario. No intentes desarmar, modificar ni reparar los componentes internos por tu cuenta.

Zonas secas: Evita almacenar o utilizar la máscara y sus accesorios en lugares con humedad extrema acumulada (como el interior del baño mientras te duchas).

Escucha a tu piel: Si experimentas dolor, irritación o cualquier tipo de incomodidad durante la sesión, detén el uso de la máscara de inmediato.


Higiene: Este dispositivo es de uso estrictamente personal. Te recomendamos no compartirlo con otras personas para mantener una higiene impecable en tu piel.

Evita accidentes: Manipula la máscara con cuidado. No la dejes caer para evitar daños por impacto físico y aléjala de objetos afilados o superficies calientes.

Fallo técnico: Si notas que la estructura de la silicona o los componentes eléctricos presentan algún daño visible, suspende su uso inmediatamente.

Nota importante: Este control no funciona por Bluetooth. Necesitas conectarlo directamente a la máscara mediante el cable para poder usarlo.

CONOCE TU MÁSCARA

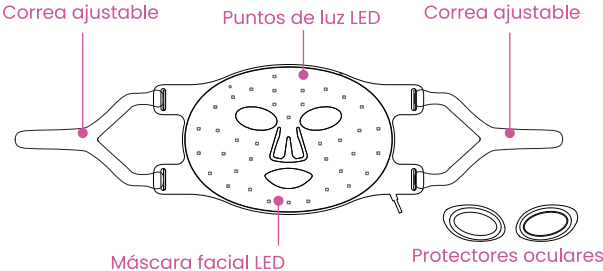

CONTROL



TECLAS

Todas las teclas del control muestran su función en la pantalla.

Encendido / apagado: Mantén presionada por 1 segundo para encender el dispositivo. La pantalla mostrará el número 10, la letra R se iluminará en la pantalla y la máscara emitirá luz roja. Al encenderse, la sesión iniciará automáticamente con una duración de 10 minutos y una intensidad baja. Vuelve a mantener presionado por 1 segundo para apagarla por completo.

brillará en verde. Una vez completada la carga total, el icono verde se mantendrá encendido durante 5 segundos y luego se apagará de forma segura.

Puerto USB-C: La máscara se carga a través de este puerto. Conecta aquí el cable de carga y el otro extremo a un adaptador de corriente (no incluido) que proporcione un voltaje de entrada de 5 V= 1 A. Utiliza solamente un adaptador que cumpla con altos estándares de seguridad y no utilices adaptadores de carga rápida o que proporcionen un voltaje o amperaje mayores que los indicados en las especificaciones de este manual.

Ten en cuenta que **el dispositivo no funcionará mientras se esté cargando**. Recuerda que el cable de la máscara facial LED debe estar completamente conectado al puerto USB-C del control para que el sistema opere de forma correcta.

Puerto USB-A: Sirve para conectar una segunda máscara (como la máscara de cuello). No usar este puerto para cargar el control.

ESPECIFICACIONES

Modelo: MFC-001
Máscara Facial LED de Fotones 7 en 1
Puerto USB: Tipo-C
Capacidad de la batería: 2200 mAh
Tiempo de carga de la batería: aprox. 2.5 hrs
Tiempo de uso con carga completa: aprox. 2 hrs
Voltaje de entrada: 5 V= 1 A
Potencia: 4.81 W
Tamaño del producto: 290 x 193 x 4 mm

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x máscara de fotones
2 x correas ajustables
2 x protectores de ojos
1 x control
1 x cable de carga
1 x manual

completo.

Cambio de color de luz: La tecla con la letra **M** (Mode) selecciona el color de la luz. Cada vez que la presiones de forma suave, cambiarás de color en el siguiente orden: **rojo** -> **verde** -> **azul** -> **morado** -> **amarillo** -> **cian** y **blanco**. El menú es cíclico, así que puedes presionarlo las veces que quieras para regresar al inicio.

LUCES, BENEFICIOS Y DATOS TÉCNICOS

- ROJA + INFRARROJO CERCANO (NIR)**
Time Traveler: Estimulación de colágeno profunda y renovación celular intensa.
633 nm y 850 nm (8.15 mW/cm²)
- VERDE**
Golden Hour Glow: Adiós manchas y daño solar. Tono equilibrado y radiante.
520 nm (7.94 mW/cm²)
- AZUL**
Pore Control: Elimina las bacterias del acné y controla la grasa.
465 nm (8.9 mW/cm²)
- MORADA**
Bye-Bye Brotes + Calm: El combo definitivo para desinflamar y prevenir marcas de acné.
460 nm y 633 nm (9.74 mW/cm²)
- AMARILLA / AMBAR**
Detox & Chill: Especial para piel sensible o con rosácea. Calma y drena toxinas
520 nm y 633 nm (9.97 mW/cm²)
- CIAN**
Zen Skin: Alivia la piel estresada o fatigada, reduce rojeces y devuelve la vitalidad
465 nm y 520 nm (9.95 mW/cm²)
- BLANCA**
Reset Total: Combate brotes, unifica y estimula colágeno al mismo tiempo.
460 nm, 525 nm y 632 nm (9.97 mW/cm²)

potentes y largas (la naranja y, sobre todo, la roja/infrarroja). Su función aquí abajo es activar los fibroblastos para disparar la producción natural de colágeno y elastina, logrando el verdadero efecto de firmeza, elasticidad y soporte que reduce los poros y las líneas de expresión.

MODO DE USO

Paso 1: Lava tu rostro a fondo y asegúrate de secarlo por completo antes de comenzar.

Paso 2: Coloca las correas en la máscara e instala los protectores oculares. Acomoda la máscara sobre tu rostro, ajusta y asegura las correas para que el dispositivo quede fijo y cómodo.

Paso 3: Conecta el control a la máscara. Mantén presionado el botón de encendido del control remoto para activar el sistema.

Paso 4: Este dispositivo cuenta con diferentes modalidades de luz que puedes ajustar según las necesidades específicas de tu piel. El modo predeterminado al encenderla es la luz roja + NIR; solo debes presionar el botón correspondiente para alternar entre las opciones. La máscara incluye una función de temporizador para programar sesiones de 10, 15 o 20 minutos.

Paso 6: Al terminar el tiempo seleccionado, el dispositivo se apagará de forma automática. En ese momento puedes retirarte la máscara para dar por finalizada tu sesión.


Paso 7: Maximiza los resultados. Con la piel receptiva tras la sesión de luz, es el momento perfecto para aplicar tus productos de cuidado diario. Extiende tu sérum favorito, tu crema hidratante o un aceite facial ligero. Tu piel absorberá todos los nutrientes de forma mucho más eficaz.

Paso 8: Limpieza y mantenimiento. Para cuidar tu equipo, limpia la superficie de silicona con una toalla suave o una toallita húmeda después de cada uso. Asegúrate de dejarla secar por completo antes de guardarla para mantenerla impecable y lista para tu siguiente sesión.



MÉTODO DE CARGA

Estado de la batería: El indicador de batería consiste en 3 barras de luz LED en la pantalla y los LED se desplazarán mientras carga. Cuando el nivel sea igual o menor al 30 por ciento, el icono de batería se iluminará en rojo. Si está entre el 31 por ciento y el 75 por ciento, el icono se mostrará en amarillo. Si se encuentra entre el 76 por ciento y el 100 por ciento,

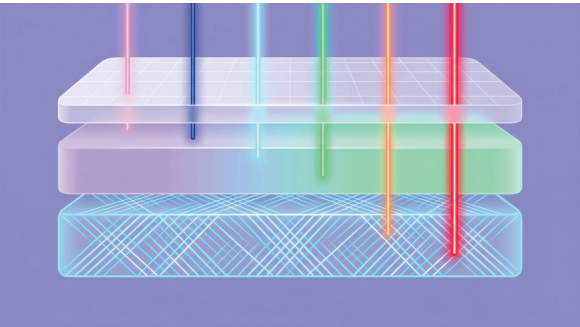

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre: Defectos de fabricación.

La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra y contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.themintstyle.com

Soporte: hello@themintstyle.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Nueva Costanera 3300, Oficina 64, Vitacura, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385.

Hecho en China

