

VESPER

3D PHOTON FACIAL MASK 8 en 1 Máscara de Fotones 3D Facial



ANTES DE USAR EL APARATO LEA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

LAS IMÁGENES EN ESTE MANUAL SON SOLAMENTE PARA REFERENCIA.
POR FAVOR CONSULTE EL PRODUCTO REAL.

INTRODUCCIÓN

Te damos la bienvenida a la experiencia VESPER

Has adquirido una de las herramientas más avanzadas en tecnología dermatológica para el hogar. Esta Máscara de Fotones LED Facial ha sido diseñada para revolucionar tu rutina de cuidado personal, combinando la eficacia de los tratamientos clínicos con la comodidad de tu espacio privado.

Gracias a su innovador sistema de fototerapia con 328 luces LED y su diseño ergonómico de cámara 3D, este dispositivo penetra en las capas profundas de la dermis para estimular la regeneración celular. El uso constante de tu máscara VESPER permite rejuvenecer tu rostro, unificar el tono de la piel y mejorar visiblemente su textura, devolviéndole la vitalidad y firmeza que buscas.

Fabricada con silicona de grado alimenticio, esta máscara garantiza un ajuste suave, seguro e hipoalergénico para todo tipo de cutis. A través de sus 4 modos de luz personalizables —incluyendo la avanzada tecnología de luz roja e infrarroja—, podrás tratar necesidades específicas como líneas de expresión, falta de luminosidad o sensibilidad cutánea.

Este manual ha sido diseñado para guiarte paso a paso en el uso correcto de tu dispositivo. Te invitamos a leerlo detalladamente para maximizar los beneficios de tu tratamiento y asegurar una experiencia de belleza profesional, segura y transformadora.

Prepárate para lucir una piel más joven, saludable y radiante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



IMPORTANTE: El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones a las personas o daños al dispositivo.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Las siguientes personas no deben utilizar el aparato: Personas sensibles a la luz, mujeres embarazadas, personas que padezcan epilepsia (ciertas luces o frecuencias pueden inducir ataques).



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

CONTRAINDICACIONES DE USO

NO utilice este dispositivo si usted:

Está embarazada o en periodo de lactancia.

- Padece de epilepsia o tiene antecedentes de convulsiones provocadas por la luz.
- Tiene cáncer de piel o lesiones precancerosas en el rostro.
- Sufre de enfermedades fotosensibles, enfermedad tiroidea, vitiligo, eczema, lupus eritematoso, o está tomando medicamentos que causen fotosensibilidad (como ciertos antibióticos o tratamientos para el acné como la Isotretinoína).
- Tiene heridas abiertas, quemaduras solares recientes o procesos inflamatorios agudos en la zona a tratar.
- Siente incomodidad durante la exposición a la luz de la máscara. En ese caso suspenda el uso de inmediato y consulte a un

profesional médico.

Prueba de Sensibilidad

- Antes del primer tratamiento completo, realice una prueba de 5 minutos en una zona menos visible (como el cuello o el antebrazo). Espere 24 horas; si observa alguna reacción adversa (enrojecimiento excesivo, picazón o ardor), suspenda su uso y consulte a un dermatólogo.

SEGURIDAD OCULAR

- Aunque la máscara cuenta con un diseño de cámara 3D para proteger la vista, no mire fijamente hacia los diodos LED cuando estén encendidos.
- Recomendamos mantener los ojos cerrados durante la sesión para mayor comodidad y relajación.

MANEJO ELÉCTRICO Y CUIDADO DEL DISPOSITIVO



IMPORTANTE: El incumplimiento de estas advertencias anulará la garantía del producto.

- Uso exclusivo en seco: No utilice la máscara cerca del agua (bañeras, duchas o lavamanos). No manipule el dispositivo ni el cable de carga con las manos mojadas.
- Carga segura: Utilice únicamente fuentes de alimentación sugeridas (5V $\equiv$ 1A). **El uso de cargadores de "carga rápida" (Fast Charge) de alta potencia podría dañar la batería interna.**
- No usar durante la carga: Por seguridad, el dispositivo no debe encenderse mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

- Temperatura: Mantenga la máscara alejada de fuentes de calor extremo y no la deje expuesta a la luz solar directa por tiempo prolongado.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO



- Limpie la máscara después de cada uso únicamente con un paño suave ligeramente humedecido. Nunca la sumerja en agua ni la enjuague.
- No intente desarmar o reparar el dispositivo por su cuenta. Esto anulará la garantía y puede representar un riesgo eléctrico.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la humedad y de la luz directa del sol.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.




En caso de sentir un calor excesivo o malestar inusual, retire la máscara inmediatamente y apague el dispositivo.

PARTES DE LA MÁSCARA

Máscara de silicona y ABS

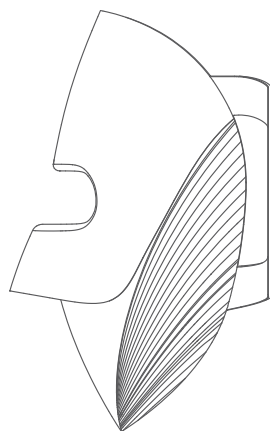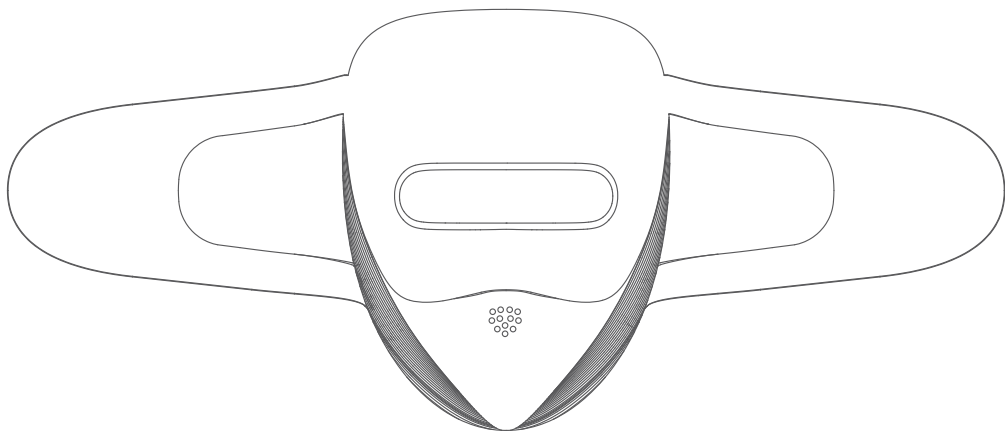

Control Remoto

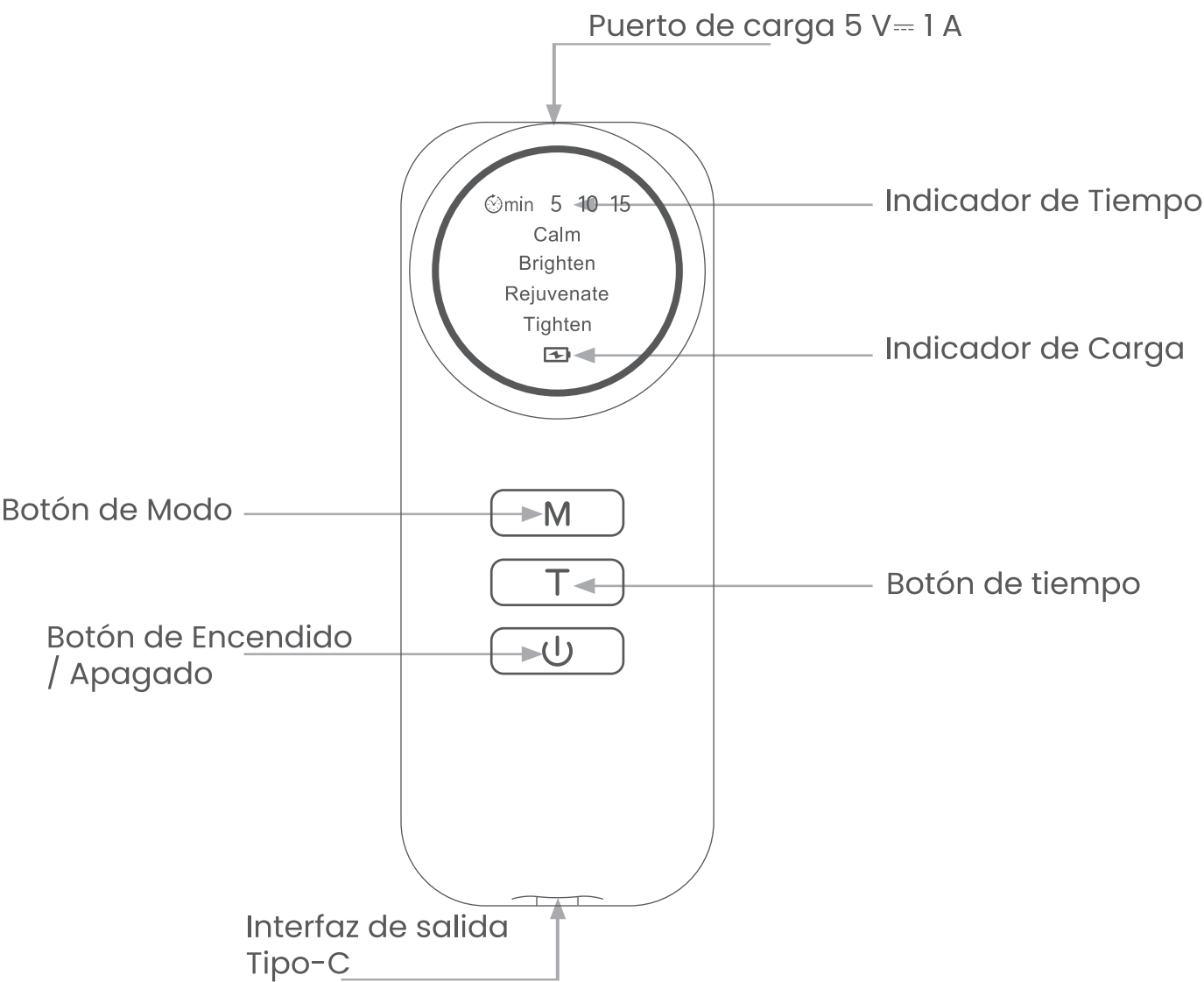

MODO DE USO: GUÍA PASO A PASO

Para obtener resultados óptimos y garantizar la seguridad de tu piel, sigue cuidadosamente estas instrucciones de operación.

Paso 1: Preparación de la Piel

La eficacia de la fototerapia depende de la penetración de la luz.

Limpieza: Remueve completamente el maquillaje y lava tu rostro con un limpiador suave.

Piel seca: Seca tu rostro dando pequeños toques con una toalla limpia.

⚠ **Importante:** No apliques cremas, sérums ni aceites antes del tratamiento.



La piel debe estar totalmente limpia y seca para evitar interferencias con la longitud de onda de los LEDs y para prevenir irritación o hiperpigmentación.


Paso 2: Conexión y Ajuste

Conexión: Conecta el cable de la máscara al controlador.

Verificación: Asegúrate de que el dispositivo tenga batería suficiente y que el flujo de energía sea estable. Verifica brevemente que los LEDs enciendan correctamente.

Ajuste: Coloca la máscara sobre tu rostro y ajusta las correas de velcro hasta que el dispositivo quede firme pero cómodo. La cámara de luz 3D debe permitirte respirar con normalidad.

Conecta la máscara con el control remoto en el puerto de entrada Tipo-C

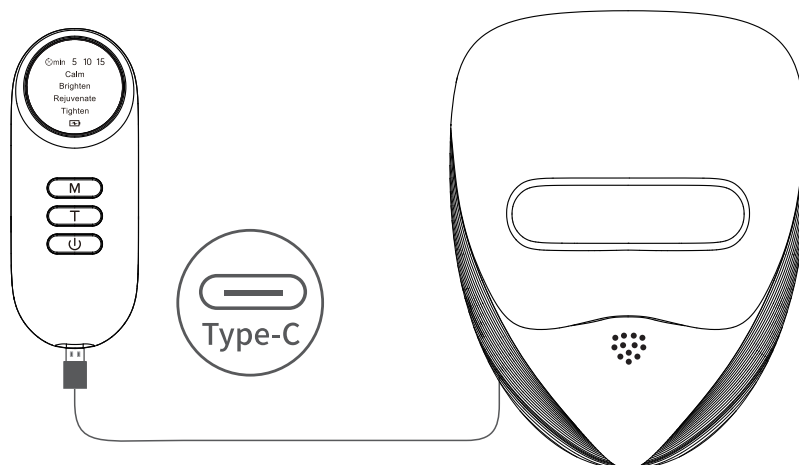

Paso 3: Operación y Tratamiento

Utiliza los botones del controlador para personalizar tu sesión:

Encendido / Apagado: Mantén presionado el botón de encendido por 1.5 segundos.

Temporizador (Timer): Presiona brevemente para alternar entre 5, 10 o 15 minutos.

Modo (M): Presiona brevemente para navegar entre los 4 modos de luz disponibles.

⚠ **Prueba de Sensibilidad Inicial:**
Antes de tu primer tratamiento en tu rostro, utiliza la máscara por solo 1 minuto. Si no presentas reacciones adversas en las siguientes 24 horas, puedes proceder con el uso regular.



Cronograma de tratamiento recomendado:

Iniciación: Los primeros tratamientos deben ser de solo 5 minutos.

Uso Normal: Una vez que tu piel se adapte, incrementa el tiempo gradualmente. Se recomienda usar de 3 a 4 veces por semana, en sesiones de 10 a 15 minutos.

Nota: Considera siempre el estado de tu piel al elegir el modo y el tiempo. Es normal que aparezcan leves marcas de presión alrededor de los ojos tras un uso prolongado; estas desaparecerán al poco tiempo.

Paso 4: Cuidado Posterior (Esencial)

Al finalizar la sesión, los poros y las células están receptivos.

Hidratación profunda: Es fundamental hidratar la piel inmediatamente después de cada tratamiento. Puedes aplicar una mascarilla hidratante o seguir tu rutina habitual de cuidado de la piel (sérum, cremas o geles). Este paso es vital para sellar los beneficios de la luz y mantener la elasticidad.



⚠ **Consejo importante de cuidado de tu piel:** Mantén tu piel hidratada y protegida con filtro solar todos los días.

DETALLE DE LOS MODOS DE TRATAMIENTO


Tu Máscara VESPER cuenta con 4 modos de fototerapia avanzada, cada uno diseñado para abordar necesidades específicas de la piel mediante longitudes de onda precisas.

Modo “Calm”: Calma y Equilibrio

Acción: Antiinflamatoria, antibacterial y calmante.

Beneficios: Ideal para pieles sensibles o con tendencia al acné. Limpia profundamente la piel desde el interior e inhibe la producción excesiva de sebo (oleosidad), ayudando a prevenir brotes y reducir rojeces.

● **Luz verde (525nm)** antiinflamatoria, antibacterial, calmante. Limpia la piel e inhibe la producción de sebo

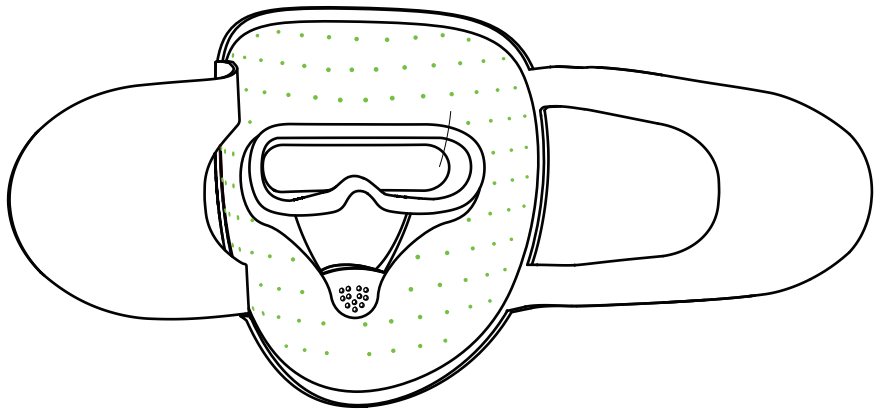


Modo “Brighten”: Unificación del Tono

Acción: Oxigenación celular y despigmentación.

Beneficios: Actúa directamente sobre la pigmentación para aclarar manchas y emparejar el tono del rostro. Refina la textura

rugosa de la piel y mejora la microcirculación, devolviéndole la vitalidad a los cutis opacos o cansados.


- **Luz amarilla (590nm)** mejora la oxigenación celular, blanquea y aclara el tono de la piel. Aclara la pigmentación, refina la piel rugosa, y mejora la circulación.

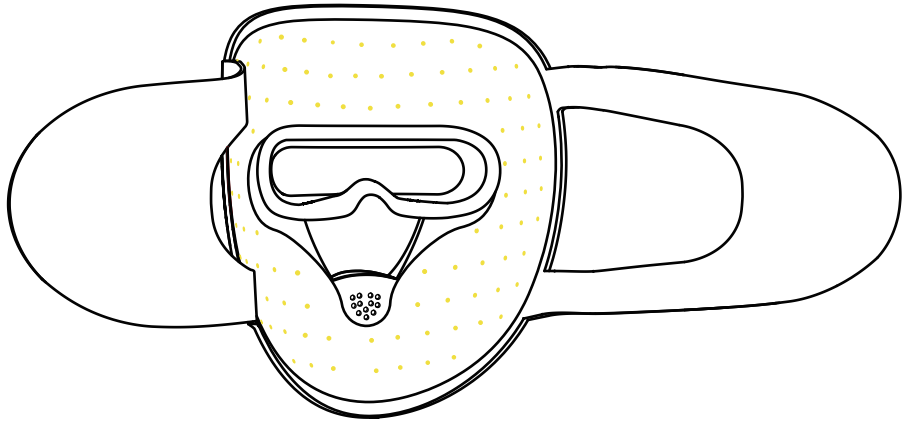

Modo “Rejuvenate”: Rejuvenecimiento Activo

Acción: Estimulación de colágeno y metabolismo celular.

Beneficios: El tratamiento antiedad por excelencia. Acelera la regeneración celular y estimula la producción natural de colágeno y elastina. Reduce eficazmente las arrugas, revelando una piel radiante, firme y visiblemente más joven desde las capas más profundas.

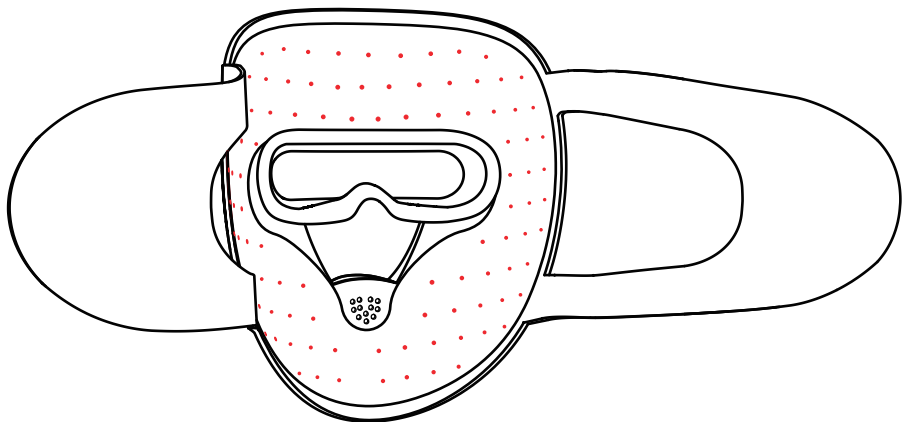


- **Luz roja (660nm)** Mejora la circulación sanguínea, acelera el metabolismo, y estimula la producción de colágeno, reduciendo efectivamente las arrugas y revelando una piel radiante y brillante, proporcionando vigor y juventud desde las capas profundas de la

piel.

Modo “Tighten”: Firmeza Profunda (Luz Roja 660nm + NIR 850nm)

Acción: Reparación celular intensa y efecto lifting.

Beneficios: Al combinar la luz roja con la Luz Infrarroja Cercana (NIR), se logra la máxima penetración dérmica. Esta combinación estimula las membranas celulares y acelera la auto-reparación de los tejidos, suavizando líneas finas y combatiendo la flacidez de manera profesional.

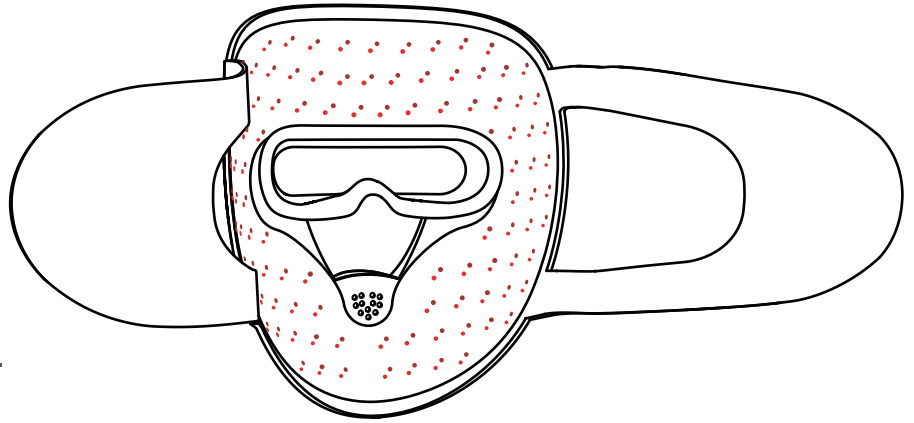

 **Luz roja+NIR (660nm+850nm)** Reafirma, y suaviza las líneas finas de la piel

La luz roja y la luz infrarroja cercana (Near Infrared Light) penetran la piel hasta las capas más profundas de la piel, estimulando las membranas celulares y acelerando la auto-reparación celular.

¿Qué es la tecnología NIR (850nm)?

La luz infrarroja cercana (Near Infrared Light) es una longitud de onda potente que **no es visible al ojo humano**. Cuando utilices el Modo Tighten, notarás los LEDs rojos encendidos, pero los diodos NIR estarán trabajando de forma invisible para reparar tu piel en profundidad.

CONSEJO DE CUIDADO DIARIO (Vital)

Para mantener y potenciar los resultados obtenidos con su máscara VESPER, es fundamental seguir estas dos reglas de oro:

Hidratación constante: La fototerapia activa el metabolismo de tu piel; asegúrate de beber suficiente agua y aplicar productos hidratantes tras cada sesión.

Protección solar: El uso de protector solar (SPF 30 o superior) es obligatorio durante el día. La piel tratada está en proceso de renovación y debe ser protegida de los rayos UV para evitar nuevas manchas o daños.

MÉTODO DE CARGA Y BATERÍA

Para garantizar la vida útil de la batería interna y un funcionamiento seguro, siga estrictamente las siguientes instrucciones de carga.

Instrucciones de Carga

- **Conexión:** Inserte el cable de carga (incluido) en el puerto TYPE-C del controlador de su máscara.
- **Fuente de Energía:** Conecte el otro extremo del cable a un adaptador de pared estándar.
- ⚠ **Importante:** Se requiere una fuente de alimentación de 5V= 1A (no incluida). Puede utilizar el puerto USB de una computadora o un cargador de celular que cumpla exactamente con esta especificación de salida (Output).
- **Proceso:** Durante la carga, el indicador en el controlador mostrará el progreso. Una carga completa tarda aproximadamente 3.5 horas.

Especificaciones de la Batería

Tipo de batería: Litio-ion (Li-ion) de 3.7V 2000mAh.

Autonomía: Una carga completa proporciona entre 60 y 90 minutos

de uso continuo (aproximadamente de 6 a 9 sesiones de 10 minutos).

Precauciones Importantes de Energía

Evite Cargadores de Carga Rápida (Fast Charge)

No utilice adaptadores de alta potencia (superiores a 5V 2A) o cargadores rápidos de smartphones modernos. Estos pueden sobrecalentar la batería y dañar los circuitos internos de la máscara, anulando la garantía.

- **Carga inicial:** Recomendamos cargar completamente el dispositivo antes de su primer uso.
- **No utilizar durante la carga:** Por razones de seguridad, el sistema bloquea el encendido de los LEDs mientras el cable de carga esté conectado.
- **Almacenamiento prolongado:** Si no va a utilizar la máscara por más de un mes, le recomendamos realizar una carga completa para evitar que la batería se descargue profundamente y pierda capacidad.

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x Máscara de Fotones LED Facial

1 x Control Remoto

1 x Cable de Carga USB-C

1 x Manual

ESPECIFICACIONES

Modelos: FV-021 / FV-022

Fuente de alimentación sugerida (no incluida): 5V= 1A (salida)

Batería: 3.7V 2000mAh Li-ion

Tiempo de carga aproximada: 3.5 horas

Tiempo aproximado de uso con carga completa: 60 - 90 min

328 luces LED de alta pureza

4 modos de luz

Temporizador: 5/10/15 min

Tamaño del producto: 22.0 x 16.9 x 11.9

Peso neto: Máscara: 290 +- 10 g Controlador 90 g

Temperatura de operación: 0 - 40°C

LONGITUDES DE ONDA

Verde (525nm)

Amarillo (590nm)

Rojo (660nm)

Rojo+NIR (660nm+850nm).

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

- La garantía cubre: Defectos de fabricación.
- La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

- Conservar el comprobante de compra.
- Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.vesperstore.cl

Soporte: contacto@ventisbrands.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Nueva Costanera 3300, Oficina 64, Vitacura. Santiago 7630412, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385.

Hecho en China