

成品尺寸: 95x130mm

材质: 157g哑粉纸

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉

封面封底内页留白,最后 多出来的页数为空白页



INTRODUCCIÓN

MADE IN CHINA

Gracias por adquirir la pistola de masaje NAIPO FitWave. Este producto es adecuado para un masaje físico antes o después del ejercicio. Puede reducir la rigidez muscular, aliviar el dolor muscular, aumentar la circulación sanguínea, aliviar la fatiga y promover

Antes de usar, lea este manual detenidamente para asegurarse de que funcione correctamente. Por favor, mantenga este manual para futuras referencias.

PELIGRO & ADVERTENCI

incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas.

A) Entorno seguro para masajes

como alrededor de líquidos, gases o polvo inflamables.

hacer que pierda el control.

 No use el masajeador cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol. Si es negligente al operar el equipo de masaje, puede causar lesiones personales.

2. Mantenga siempre el equilibrio corporal adecuado para controlar mejor el equipo de masaie en situaciones inesperadas.

ATENCIÓN - LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDAD-**OSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO:**

1. No use este producto en la cabeza u otras partes huesudas del cuerpo. Úselo solo en las partes de tejidos blandos del cuerpo. No se recomienda su uso en áreas con

2. El producto no puede reemplazar el tratamiento médico. Si tiene dolor físico, está recibiendo tratamiento médico o está utilizando otros dispositivos médicos, consulte a su médico antes de usar este producto.

3. Para evitar pellizcos, mantenga los dedos y el cabello alejados de la parte posterior del cabezal de masaje operativo.

4. No ponga el producto en el agua. Si el producto cae al agua, envielo para su

- 5. Mantenga este producto alejado del fuego.

Model: NPMG-2008

- 6. No desmonte este producto de ninguna manera.
- 8. No utilice el producto mientras conduce y observe todas las normas de conducción para garantizar la seguridad.
- 9. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido upervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben



Cuando el cabezal de masaie no esté instalado, no toque esta parte para evitar pellizcos.
Al instalar el cabezal de masaje para iniciar el dispositivo, no toque esta parte para evitar pellizcos.

EL PRODUCTO

Si tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a un médico antes de usar este

- 1. Personas embarazadas;
- 3. Personas con discapacidad física;
- 4. Personas que han tenido cirugías recientemente.

Estas condiciones no significan que no pueda usar el producto para hacer ejercicio, pero le recomendamos que consulte primero a un médico.

PERSONAS A LAS QUE NO SE RECOMIENDA UTILIZAR


La experiencia práctica ha demostrado que, en muchos casos, agregar entrenamiento con vibraciones a un plan de tratamiento también puede ser un método de tratamiento eficaz. Esto debe hacerse bajo el consejo o la supervisión de un médico, un experto o un fisioterapeuta.

RECOMENDAR AREAS DE MASAJE

NO MASAJE ESTAS AREAS

EN EL CUADRO

Pistola de Masaje

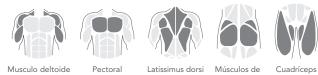













MANUAL DE OPERACIONES

Mantenga presionado el botón de inicio durante 2 segundos. 4 VELOCIDAD INTELIGENTE DE AUTOADAPTACIÓN Diseñado con tecnología inteligente de adaptación automática. La pistola de masaie FitWave aiusta automáticamente

Conéctelo a la fuente de alimentación con el cable USB-C hasta que la batería esté completamente cargada.

Cabeza redonda | Brazos, cintura, glúteos, muslos, pantorrillas Cabeza en forma de Y | Cuello, a ambos lados de la columna,

tendón de Aquiles Cabeza de bala | Meridianos, articulaciones, palmas, plantas

* Se recomienda la carga completa para el primer uso.

2 INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE MASAJE

. Cárguelo cuando la luz roja indicadora parpadee 3 veces, ya que indica que la batería está casi vacía. 2. Al cargar, la luz indicadora parpadea en blanco. Cuando la batería está llena, muestra 5

la intensidad según su uso.

ATENCIÓN: NO USE EL DISPOSITIVO DURANTE LA CARGA.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

I. No exceda el uso diario recomendado de 30 minutos por día. 2. Asegúrese de que el producto se haya apagado después de su uso o antes de

3. No arrojar durante el uso. 1. Limpie con un paño seco, no use aceite de motor, solventes orgánicos u otros agentes

uímicos para limpiar este producto. 5. Guarde el producto en un lugar seco cuando no lo use durante mucho tiempo.

producto cada seis meses para evitar daños en la batería debido a una pérdida de energía.

MAL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

roducto no se ende	La temperatura es demasiado baja: la actividad de la batería del producto disminuirá y no se iniciará normalmente si se encuentra en un entorno por debajo de los 0 grados Celsius durante mucho tiempo. Puede parecer que la máquina puede arrancar normalmente, pero no puede funcionar con normalidad.	Coloque el dispositivo en un entorno superior a 0 grados Celsius durante 2 horas o utilice un secador de pelo para aumentar rápidamente la temperatura de la máquina.
	La temperatura es demasiado alta: El producto puede sobrecalentarse si se usa en un ambiente por encima de los 40 grados Celsius. Es posible que la máquina no pueda arrancar normalmente.	Coloque el dispositivo en un ambiente por debajo de los 40 grados Celsius durante 2 horas y luego enciéndalo.
	Energía de batería insuficiente: cuando la batería está en un estado de baja energía y la máquina no se carga durante un largo período de tiempo, la batería puede entrar en la protección de baja energía (protección de descarga excesiva). En este momento, la máquina no funcionará normalmente.	En el estado de apagado, conecte el dispositivo para cargar. La máquina puede funcionar normalmente después de estar completamente cargada.

Los cabezales de masaje no están Compruebe y coloque los cabezales de masaje se caen colocados correctamente.

El producto no se carga y la luz del panel está El cable de carga, el puerto de carga y la fuente de alimentación no están correctamente colocados.

Verifique y vuelva a conectar el cable de carga, el puerto de carga y la fuente de alimentación apagada alguna anomalía. Si es así, envíelo para su inspección. Deja de actuar después de 10 de apagado automático de 10 minutos de uso.

La función de temporizador de apagado automático de 10 minutos de lbotón de inicio.

Reinicie la máquina presionando el botón de inicio.

ATENCIÓN: Si los métodos anteriores no resuelven el problema correspondiente del

No desmonte ni modifique el producto usted mismo. NAIPO no será responsable de ninguna pérdida causada por el desmontaje o modificación no autorizados del producto

La NAIPO no será responsable de los costos, daños o reparaciones incurridos como

3. Acciones no autorizadas como: reparación del producto, mal uso, abuso, modificación.

producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de NAIPO.

Esta acción puede poner en peligro al usuario y / o inutilizar el producto.

. Daños ocasionados por fuerza mayor, uso indebido o transporte

PROBLEMAS POSIBLES RAZONES SOLUTIONS

El período de garantía es de 12 meses y la autoridad no es transferible. El usuario puede disfrutar del servicio de garantía con documentos o certificados válidos dentro del período de garantía a partir de la fecha de compra.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene baterías y no debe desecharse con la basura doméstica. Obtenga recomendaciones de reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

NOTAS LEGALES

Todo el contenido anterior no contiene ninguna declaración de tratamiento. El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad requiere la ayuda de un médico o terapeuta. NAIPO no promete que el producto tenga ningún efecto curativo.

ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL PRODUCTO	Pistola de masaje NAIPO FitWave	
MODELO	NPMG-2008	
PESO NETO	1.34lb / 610g	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	6.4×6.2×2.3in / 163×157×58mm	
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2600mAh	
APORTE	5V2A	
ENERGÍA	10W	

Masaje USB-C

Cable

Evite masajear las áreas marcadas con un círculo rojo.

4 Cabezales de

5. Dañado del embalaje interior y exterior del producto, piezas faltantes, etc. 6. Imposibilidad de proporcionar comprobante de compra.

4. No siga las instrucciones.

1. El período de garantía ha expirado.

7. Desgaste externo e interno causado por operación mecánica.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

07