

ozū

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CINTURÓN TÉRMICO

UW-012



Introducción

Gracias por adquirir el Cinturón Térmico OZU. Por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones y manténgalo en un lugar seguro para futuras referencias. Si necesita asistencia, contacte al Servicio Técnico Autorizado en su país.

Especificaciones del producto

Modelo	UW-012
Nombre	Cinturón Térmico
Voltaje de entrada	110-240V~
Voltaje de salida	12V --- 2A 24W
Peso del producto	336.5 g
Tamaño del producto	122 x 32 x 2 cm
Temporizador	2 horas


Precauciones de seguridad

01. No use este producto durante la primera hora después de una comida
02. El producto solo puede ser usado de 1 a 3 veces por día, de 10 a 60 minutos cada vez y no puede ser usado por más de 2 horas
03. Tome la cantidad necesaria de agua durante y después de su uso para eliminar toxinas de manera apropiada.
04. En caso de resfriado, no entre en contacto con agua fría dentro de los siguientes 30 minutos después de usar el producto
05. No conecte el dispositivo con otro adaptador
06. Este producto no tiene relación con equipamiento médico, solo puede ser usado para calentar el cuerpo y se debe evitar su uso en heridas
07. Las personas con discapacidades físicas deben consultar con un médico antes de usar el producto
08. Los niños y otras personas con discapacidades deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto
09. Las mujeres embarazadas no deberían usar este producto
10. Si el producto no funciona de manera normal o si siente incomodidades, por favor suspenda su uso y contacte con el Servicio Técnico Autorizado.

11. No coloque objetos pesados sobre el producto
12. No use el producto cuando esté doblado
13. Apague el producto cuando no lo esté usando o cuando esté lejos
14. No coloque objetos pesados o inflamables sobre el producto
15. No inserte objetos extraños o perforo el producto, y no lo jale del cable de alimentación o de la unión con el adaptador.
16. No use el producto por mucho tiempo mientras duerme

Solución de problemas

Problemas	Causas	Soluciones
Problemas con el encendido	No conectó a la corriente eléctrica	Revisar si está correctamente conectado
Sobrecalentamiento del producto	Usar el producto por largos periodos de tiempo	Haga pausas de 30 minutos antes de usarlo nuevamente
El producto no reacciona después de mantener presionado el botón de encendido	Protección térmica de la unidad de calefacción interna o posible avería del adaptador	Por favor contacte con el Servicio Técnico Autorizado

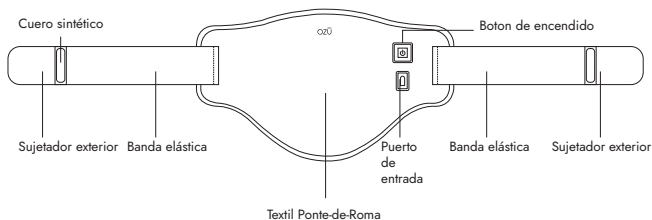

Instrucciones de uso

1. Conecte el adaptador a la toma de corriente, presione el botón de encendido y comenzará a calentarse la almohadilla.
2. Coloque el producto en la zona que necesite calentar, y ajuste la banda elástica para que se adapte al tamaño del cuerpo. Use ropa o una toalla en la zona donde usará el producto.
3. Ajuste la temperatura: Encienda el producto, cuando el indicador esté en rojo, significa que la temperatura es alta; cuando esté azul, significa que la temperatura es media; cuando esté verde, significa que la temperatura es baja; cuando la luz indicadora esté apagada, significa que el producto está apagado.
4. Apagado: El producto se apagará automáticamente después de 2 horas de trabajo continuo. Después de usar el producto, presione el botón de encendido y mantenga pulsado hasta que la luz indicadora se apague.

Instrucciones de limpieza

Apague el producto y desconecte el adaptador, enjuague el producto a mano con agua tibia y guárdelo después de secarlo. No lavar a máquina.

Precaución

El Cinturón tiene diferentes efectos térmicos bajo diferentes circunstancias lo que resulta en diferentes sensaciones de temperatura. Cubra con una manta o un paño cuando la temperatura no sea lo suficientemente alta; Use una toalla o un paño entre el producto y la zona a calentar, o simplemente afloje el producto cuando la temperatura sea demasiado alta. Recuerde no usar el producto en contacto directo con la piel en caso de presentar piel escaldada.

- Si tiene dudas acerca de su salud, consulte a su médico antes de usar el producto.
- El producto puede ser utilizado por niños mayores a 3 años y menores de 15 años bajo supervisión y con los controles siempre ajustados al valor mínimo de temperatura.
- El cable y la unidad de control del producto pueden dar lugar a riesgos de enredo, estrangulación, tropiezos o pisadas si no se coloca correctamente. El

GARANTÍA OZU

Ozu garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Ozu, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Ozu no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

Condiciones de la garantía

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Ozu se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

Términos de la garantía

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Ozu (por ejemplo, en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Ozu lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Ozu puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Ozu. La garantía de Ozu provista se aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

Exclusiones

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo, pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o lote o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Ozu.
- La unidad haya sido dañada – incluyendo, pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o del lote o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato

incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.

- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la marca Ozu que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Peru SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

Servicios Técnicos Autorizados

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Ozu o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Ozu el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)

+56 22 840 5567

contacto@ozulife.com

www.ozulife.com

PERÚ

0800 56185

+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@ozulife.com

www.ozulife.com

MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)

+52 55 6826 9609

contacto@ozulife.com

www.ozulife.com

COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@ozulife.com

www.ozulife.com