

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES



ALMOHADILLA TÉRMICA

UW-008



ALMOHADILLA TÉRMICA
PARA ESPALDA

UW-009



CALENTADOR DE PIES

UW-010





INSTRUCCIONES IMPORTANTES CONSERVAR PARA USO FUTURO

¡Felicidades por su compra! Antes de usar por primera vez el nuevo aparato, es importante que lea atentamente todas las instrucciones, incluso si está familiarizado con el aparato. Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto, especialmente las instrucciones de seguridad, y conserve el instructivo para su uso futuro. Si le da este dispositivo a otra persona, es vital que también entregue el instructivo.

El incumplimiento de la información proporcionada a continuación puede provocar lesiones personales o daños materiales (descarga eléctrica, quemaduras en la piel, incendio). La siguiente información de seguridad y peligros no solo sirve para proteger su salud y la salud de los demás, sino que también protege este producto de daños. Por lo tanto, observe esta información de seguridad y conserve estas instrucciones junto con el producto.

	<p>Léanse las instrucciones antes de usar</p>		<p>Se puede lavar en máquina con agua fría (a 30°C o menos)</p>
	<p>No insertar alfileres</p>		<p>No usar blanqueador</p>
	<p>No usar doblado o arrugado</p>		<p>No secar en máquina secadora</p>
	<p>No lo use con niños pequeños (0-3 años)</p>		<p>No planchar</p>
	<p>No lavar en seco</p>		<p>Clase II</p>
	<p>Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben incluirse en la basura doméstica, sino deben recolectarse por separado y disponerse de ellos a través de los sistemas locales de recolección y devolución.</p>		<p>El equipo cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales de la Comunidad Europea</p>

ADVERTENCIAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos electrónicos, deben tomarse en cuenta algunas precauciones de seguridad para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o incendios, incluidas las siguientes:

1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones.
2. No utilice este producto mientras duerme.
3. No utilice este producto en un niño o un animal.
4. Esta almohadilla no debe ser utilizada por ni para un inválido, una persona dormida o inconsciente, una persona con diabetes, o una persona con mala circulación sanguínea.
5. No utilice en pieles insensibles.
6. Pueden producirse quemaduras independientemente del ajuste de control. Revise frecuentemente la piel debajo del aparato.
7. No utilice en un ambiente libre de oxígeno.
8. No utilice alfileres o ningún otro objeto metálico para sujetar el aparato.
9. No amontone, se sienta sobre o contra el aparato, ni aplaste el aparato. Evite los pliegues agudos
10. No use el cable de alimentación para jalar el aparato.
11. No use el cable de alimentación para manipular el aparato.
12. El dispositivo no deberá ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.
13. Coloque el aparato encima y no debajo de la parte del cuerpo que necesite calor.
14. el aparato solo puede ser utilizada en circuitos de CA de 220-240 voltios. Desenchufe cuando no esté en uso. No use con generadores o convertidores de corriente o inversores.
15. No manipule el aparato de ninguna manera.
16. No hay piezas que pueda reparar el usuario. Si esta almohadilla no funciona de manera correcta por cualquier motivo, por favor revise la garantía para obtener información sobre el servicio al cliente.
17. No utilice el aparato con linimentos, pomadas u otras preparaciones, especialmente las que contienen ingredientes que producen calor. Esto puede provocar quemaduras en la piel.
18. No doble ni apriete el cable. No utilizar si el cable está dañado.
19. Nunca deje el aparato sin desatendido, especialmente si hay niños presentes.
20. Enrolle el cable sin apretar mientras lo guarda, enrollarlo con fuerza puede dañar el cable y sus partes internas.
21. Cuando no esté en uso, guarde el aparato térmico en el paquete original en un lugar oscuro, fresco y seco.
22. Guarde este manual de instrucciones para usarlo en un futuro.
23. Si no hay energía eléctrica, asegúrese de que el tomacorriente de CA y que la conexión sea segura.
24. Suspenda su uso si la falla continua.
25. Use el control para ajustar la temperatura al nivel deseado.
26. No hay piezas que pueda reparar el usuario. Si esta almohadilla no funciona de manera correcta por cualquier motivo, por favor revise la garantía para obtener información sobre el servicio al cliente.

- 27. No utilice el aparato con linimentos, pomadas u otras preparaciones, especialmente las que contienen ingredientes que producen calor. Esto puede provocar quemaduras en la piel.
- 28. No doble ni apriete el cable. No utilizar si el cable está dañado.
- 29. Nunca deje el aparato sin desatendido, especialmente si hay niños presentes.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO ÚNICAMENTE DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO DEBE SER UTILIZADO ÚNICAMENTE CON EL CONTROLADOR PROPORCIONADO (MODELO: QDK20-KE4). INTERCAMBIAR LOS CONTROLADORES DE DIFERENTES APARATOS PUEDE DAÑARLOS E INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

Las quemaduras pueden ocurrir independientemente de los ajustes del control; revise la piel bajo el aparato constantemente. Desconecte el producto cuando no esté en uso.

PRECAUCIÓN:

Este aparato está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o aterrizado, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si se requiere un cable más largo, puede usarse una extensión certificada cuya potencia eléctrica permitida sea igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños, quienes pueden tirarlo y/o tropezar por accidente.

ESPECIFICACIONES:

Modelo: UW-008

Tamaño: 30 x 60 cm

Material: Polar + poliéster capitonado por soldadura ultrasónica

Color: Gris

Controlador con 4 configuraciones de calor con temporizador de 90 minutos

Longitud del cable: 2 m

Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecorriente

Costura de borde: Cinta al bias

Lavable en Máquina (desconectando el controlador)

Potencia: 110 W

Voltaje: 220-240 V~

Modelo: UW-009

Tamaño: 84 x 61 cm

Material: Polar + poliéster

Color: Gris

Controlador con 4 configuraciones de calor con temporizador de 90 minutos

Longitud del cable: 2 m

Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecorriente

Costura de borde: Cinta al bias

Lavable en Máquina (desconectando el controlador)

Potencia: 110 W

Voltaje: 220-240 V~

Modelo: UW-010

Tamaño: 30 x 30 x 24 cm

Material: Polar + poliéster

Color: Gris

Controlador con 4 configuraciones de calor con temporizador de 90 minutos

Longitud del cable: 2 m

Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecorriente

Costura de borde: Cinta al bias

Lavable en Máquina (desconectando el controlador)

Potencia: 110 W


Voltaje: 220-240 V~

Producto fabricado en China


GUÍA DE USO

PARTES DEL APARATO

1. Aparato térmico
2. Conector del aparato
3. Conector del controlador
4. Controlador
5. Cable de alimentación/enchufe

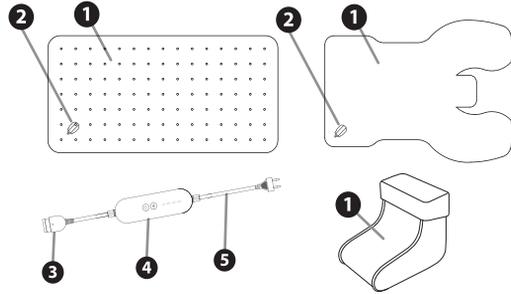

Antes de cada uso, inspeccione el dispositivo para asegurarse de que no haya daño en el cable de alimentación, el controlador o el aparato. El conector del aparato y el conector del control están diseñados para conectarse de una sola forma. Alinee las clavijas internas y júntelas hasta que los conectores estén asegurados y hasta que el aparato esté conectado a un toma corriente de CA de 220-240 voltios.

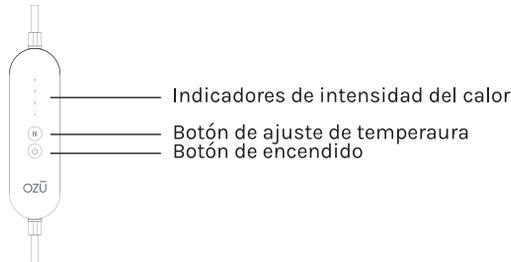

Use el control para ajustar la temperatura al nivel deseado

Presione el botón ⏻ en el control. El Led indicador del nivel de temperatura se encenderá, lo que significa que la manta está encendida en el modo de calefacción.

Presione el botón ⏸ para cambiar al modo de calefacción adecuado. Este control tiene 4 niveles de calor, lo que permite establecer la temperatura perfecta en minutos.

NOTA: Si el controlador se apaga, asegúrese de que los conectores de la almohadilla y el controlador estén bien conectados y luego reinicie el producto presionando ⏻ .

Coloque la almohadilla sobre el cuerpo. Si la almohadilla no se calienta de manera uniforme, asegúrese de que no hay pliegues ni zonas abultadas.

Apague el producto presionando el botón de apagado y desconéctelo cuando no esté en uso.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Este producto se apagará después de un tiempo establecido. La configuración es de 1.5 horas (90 minutos).

OPCIÓN DE CALOR HÚMEDO

1. Toque suavemente un lado del aparato con una esponja/paño húmedo, o use un atomizador para aplicar una fina capa de humedad.
2. Asegúrese de que los conectores del control y almohadilla no estén rociados ni húmedos.

PRECAUCIÓN: No use este producto si los conectores del control o almohadilla están húmedos. Asegúrese de que las conexiones del producto estén completamente secas antes de usarse

3. Coloque el lado húmedo de la almohadilla encima del cuerpo.
4. Apague el producto presionando el botón  y desconéctelo cuando no esté en uso.

Cuando el aparato es susceptible de ser usado durante un periodo prolongado, por ejemplo por el usuario cuando se duerme, los controles deberían ajustarse en el nivel de calor 1.

El aparato sólo debe ser usado con el (los) controlador(es) que está(n) marcado(s) en la etiqueta del aparato.

El aparato no ha de usarse por parte de niños a menos que los controles se haya preajustado por un padre o tutor, o a menos que el niño haya sido adecuadamente instruido sobre cómo utilizar los controles de forma segura.

PRECAUCIONES AL USAR EL PRODUCTO

El aparato debe ser devuelto al fabricante o su agente de ventas si la conexión se ha abierto o dañado.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el controlador y guárdelo en un lugar seguro antes de lavar el aparato.

Cuando no se use, almacenar como se indica:

- Enrolle el cable sin apretar mientras lo guarda, enrollarlo con fuerza puede dañar el cable y sus partes internas.
- Cuando no esté en uso, guarde el aparato térmico en el paquete original en un lugar oscuro, fresco y seco.
- Cuando se almacene el aparato, permítase que se enfríe antes de doblarlo.

- No doblar el aparato colocando objetos en su parte superior durante su almacenaje (sólo para mantas y almohadas).
- Examínese el aparato frecuentemente por si hay signos de desgaste o daño. Si tales signos existen o si el aparato ha sido usado indebidamente, devolver al distribuidor previamente a cualquier nuevo uso.

LIMPIEZA

1. Desconecte el cable de alimentación del toma corriente.
2. Asegúrese de que el conector del aparato esta desconectado del conector del control presionando los lados del conector del control mientras jala para desconectarlo.
3. Use detergente neutro, agua fría y lavadora de ciclado suave y delicado o lavar a mano con almohadillas.
4. Airee o coloque el aparato en una superficie plana para su secado. No secar en secadora.
5. Asegúrese de que el producto este completamente seco antes de su uso.
6. Para guardar el producto, enrolle el aparato térmico sin apretar hacia el cinturón de almacenamiento, pase las correas por los extremos, y guárdelo en un lugar fresco, seco y oscuro después de cada uso. Evite dobleces bruscos en el aparato térmico.

GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

Garantía

La fabricación de este producto se ha llevado a cabo de acuerdo con los más altos estándares internacionales de calidad y su garantía cubre defectos en los materiales y en la mano de obra por un período de 24 meses

Condiciones Generales

1. Para solicitar la garantía es requisito indispensable presentar su boleta de compra. Esta Garantía no será válida en caso de que la boleta tenga alteraciones, tachaduras o falta de información
2. En caso de que el producto presentara defectos en los materiales o en la mano de obra, OZU reparará o cambiará este producto por otro igual o similar, así como las partes o componentes defectuosos del mismo sin cargo para el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Centros de Servicio Técnico Autorizados OZU serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía otorgada por un tercero.

La garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el periodo de garantía haya expirado.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.

- Daños causados por golpes, caídas, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, agentes naturales, ambientes de polvo excesivos, líquidos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales, (por ejemplo, que haya sido utilizado para fines comerciales o se le haya dado un uso no domiciliario)
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Desgaste normal de los accesorios por efecto del uso o del mal uso.
- Que el producto haya sido desarmado, reparado, y/o alterado por personas o talleres de servicio no autorizados por OZU
- Descargas eléctricas súbitas o una instalación eléctrica defectuosa de la casa
- Los accesorios que sufren desgaste con el uso del producto
- Productos de la Marca Ozu que no sean importados por Ventis SPA para el mercado chileno.

Servicios Técnicos Autorizados:

Chile

contacto@ozulife.com
+56 22 840 5567

Perú

contacto@ozulife.com
0800 56185

México

contacto@ozulife.com
+52 55 6826 9609