


MANUAL DE USUARIO

VESPER

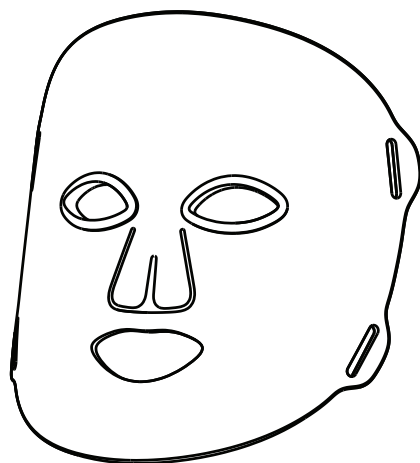

MÁSCARA DE FOTONES LED FACIAL
PHOTON LED FACIAL MASK


POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE USUARIO EN SU TOTALIDAD
ANTES DE USAR EL APARATO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Introducción del producto

El dispositivo utiliza el principio de la terapia de luz para activar células profundas bajo la piel y mejorar su condición, emitiendo luces especialmente procesadas en longitudes de onda específicas. Es un método de cuidado de la piel no invasivo, sin químicos, indoloro y seguro.

La piel absorbe la luz y la convierte en energía intracelular, provocando una reacción fotoquímica—enzimática. Durante el proceso, se producen grandes cantidades de glucógeno y proteínas que promueven el metabolismo celular y la regeneración de colágeno, logrando efectos como: blanqueamiento, rejuvenecimiento, tratamiento del acné, eliminación de manchas oscuras, reafirmación de la piel y reducción de arrugas.

Descripción del producto

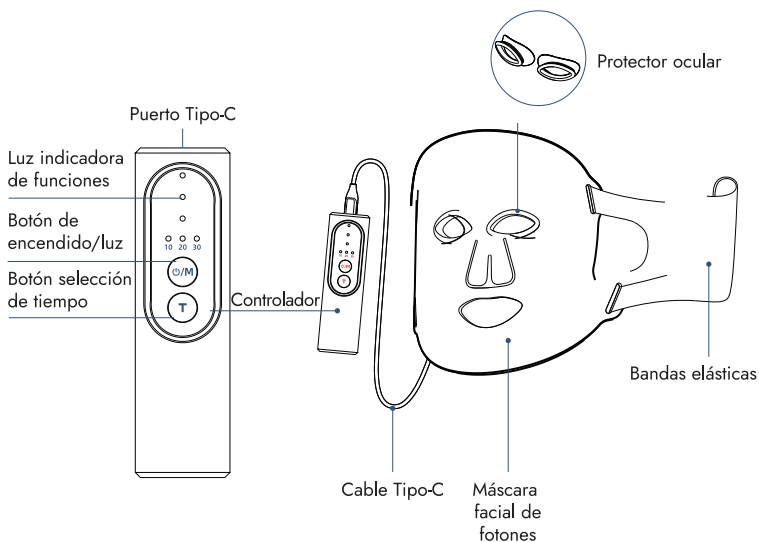

- Seguro: Sin químicos ni dolor.
- Cómodo: Silicona suave y amigable con la piel.
- Personalizable: Compatible con esencias y mascarillas.
- Versátil: 8 luces y 8 modos para distintos problemas cutáneos.
- Fácil de usar: Temporizador integrado
- Flexible: Controlador independiente para moverse durante el uso.

Funciones del producto

El dispositivo utiliza luces en 8 longitudes de onda diferentes y las funciones principales son las siguientes:

1. Luz roja ($630 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$): luz bioactiva que aumenta la vitalidad celular, acelera la circulación, regenera colágeno y tejido fibroso, mejora elasticidad y opacidad de la piel. Efectos antiedad, antioxidantes y reparadores.



2. Luz infrarroja ($850 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$, invisible): favorece la producción de colágeno, acelera metabolismo cutáneo, aclara el tono, reduce poros y rejuvenece.



3. Luz azul ($450 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$): elimina bacterias causantes del acné (*Propionibacterium acnes*) mediante oxígeno activo.



4. Luz verde: Con una longitud de onda de $520 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$, puede ayudar a calmar la piel, calmar los nervios, relajar y restablecer el equilibrio de la piel sensible, estabilizar y relajar los nervios y eliminar toxinas del cuerpo.



5. Luz amarilla ($580 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$): mejora oxigenación celular, favorece la microcirculación, reduce pigmentos, estimula el crecimiento celular y reduce arrugas.



6. Luz Púrpura: Longitud de onda de $420 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$. Esta luz tiene efectos y propiedades curativas particularmente buenos en el tratamiento del acné y la eliminación de cicatrices de acné.




7. Luz cian: con una longitud de onda de $490 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$, puede mejorar la energía celular y promover el metabolismo.




8. Luz blanca: con un rango de longitud de onda de $400\text{-}700 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$, puede penetrar profundamente en la piel, acelerar el metabolismo, descomponer la pigmentación y mejorar las líneas finas y la flacidez de la piel.




Modos de uso

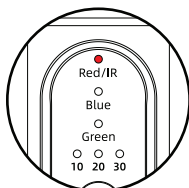


1. Rojo (luz indicadora roja)

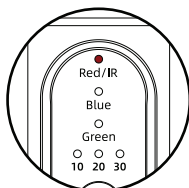


2. Infrarrojo (rojo oscuro)

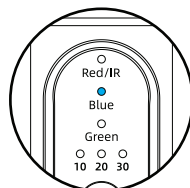


3. Azul (azul)

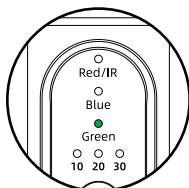


4. Verde (verde)

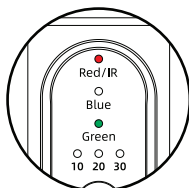


5. Amarillo (rojo + verde)

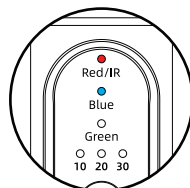

6. Púrpura (rojo + azul)

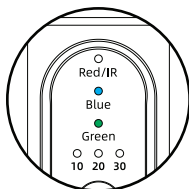

7. Cian (azul + verde)

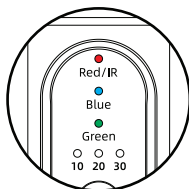

8. Blanco (rojo + azul + verde)

Características



Eficaz: 72 Luces LED para tratamiento de gran área.



Versátil: 8 luces y 8 modos para distintos problemas cutáneos.



Seguro: no invasivo, sin químicos ni dolor.



Fácil de usar: temporizador integrado y terapia en un paso.



Cómodo: silicona suave y amigable con la piel.



Flexible: controlador independiente para moverse durante el uso.



Personalizable: compatible con esencias y mascarillas.

Advertencias

1. No usar si eres sensible a la luz (a menos que se realicen pruebas).
2. No usar durante el embarazo (riesgos no establecidos).
3. No usar si padeces epilepsia (ciertas luces o frecuencias pueden inducir ataques).

Precauciones

1. El dispositivo no es resistente al agua.
2. No usar con medicamentos que causen fotosensibilidad.
3. No usar mientras duerme, camina o conduce.

4. Seguir instrucciones y evitar uso excesivo.
5. Suspender uso si hay molestias o enrojecimiento por más de 24 hrs. Consultar con su dermatólogo.
6. No tocar las perlas de luz encendido.
7. No usar si está dañado.
8. No someter a golpes para evitar daños.

Método de aplicación



1. Lave el rostro y séquelo suavemente (recomendado aplicar esencia).




2. Coloque las bandas elásticas en la máscara.




3. Conecte el cable Tipo-C de la máscara al controlador.




4. Ajuste la máscara al rostro con velcro, evitando fugas de luz hacia los ojos.

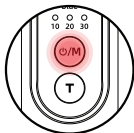

5. Mantenga presionado el botón de encendido 1,5 s. El modo por defecto es luz roja.

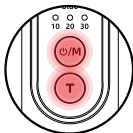

6. Use los botones para cambiar modo (rojo, azul, amarillo, rojo+azul, infrarrojo) y tiempo (10, 20 o 30 min).

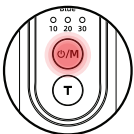

7. El dispositivo se apaga automáticamente al finalizar o manualmente presionando 1,5 s.

Se recomienda usar 3 a 5 veces por semana.

Nota:

La luz infrarroja es invisible; solo se percibe un leve tono rojizo (normal). Cargar completamente antes del primer uso.

Método de carga

1. Conectar el controlador a un adaptador (no incluido) mediante cable Tipo-C.
2. Al enchufar, se enciende la pantalla y el símbolo de batería parpadea.
3. Cuando el símbolo quede fijo, la carga está completa.

Almacenamiento y cuidado

1. Limpiar con paño seco después de usar, no sumergir.
2. Guardar en lugar fresco y sin sol directo.
3. Mantener fuera del alcance de niños.
4. No abrir ni reparar por cuenta propia; contactar servicio técnico si falla.
5. Guardar en su bolsa después de usar.

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.vesperstore.cl

Soporte: contacto@ventisbrands.com

ESPECIFICACIONES

Modelo: FV-019

Máscara de Fotones LED Facial (Photon LED Facial Mask)

Puerto USB: Tipo-C

Capacidad de la batería: 2600 mAh

Tiempo de carga de la batería: aprox. 4 hrs

Tiempo de uso con carga completa: aprox. 2 hrs

Voltaje de entrada: 5 V \pm 1 A

Potencia nominal: 5 W

Hecho en China

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Máscara de Fotones Facial
- 1 x Control
- 2 x Protectores de ojos (derecho e izquierdo)
- 2 x Bandas elásticas (derecha e izquierda)
- 1 x Cable de carga USB tipo C
- 1 x Manual de instrucciones

IMPORTER & DISTRIBUTOR/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / **MÉXICO:** Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / **PERÚ:** Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / **COLOMBIA:** Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385
NIT 901375385